

Dräger Savina® 300 Démontage/Montage



Démontage/Montage du capteur de débit

<p>1 Ouvrir le rabat en le relevant par son bord inférieur.</p>  <p>Refermer le rabat. 3</p>	<p>2 Faire coulisser le capteur de débit à fond vers la gauche.</p>  <p>Faire coulisser le capteur de débit vers la droite pour le placer dans la prise. 2</p>	<p>3 Déconnecter le capteur de débit de la prise.</p>  <p>Insérer le capteur de débit dans la prise. 1</p>
--	--	--

Démontage/Montage de la valve expiratoire

<p>1 Tourner la bague de verrouillage à fond vers la gauche.</p>  <p>Tourner la bague de verrouillage à fond vers la droite jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre. 5</p>	<p>2 Retirer la valve expiratoire de la fixation.</p>  <p>Tourner la bague de verrouillage à fond vers la gauche et enfoncer la valve expiratoire dans la cavité. 4</p>	<p>3 Retirer de la valve expiratoire l'embout du capteur de débit.</p>  <p>Placer l'embout du capteur de débit sur la valve expiratoire. 3</p>
<p>4 Retirer le diaphragme.</p>  <p>Placer le diaphragme à l'extrémité du corps de la valve expiratoire. 2</p>	<p>5 Retirer et vider le récipient du piège à eau.</p>  <p>Mettre en place le récipient du piège à eau. 1</p>	


Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d'utilisation. Il faut toujours respecter les instructions d'utilisation et les règles en vigueur dans l'établissement hospitalier.

Dräger Savina® 300

Capteur de débit : Consignes de retraitement Nettoyage et désinfection manuels




- 1** Préparer la solution nettoyante.

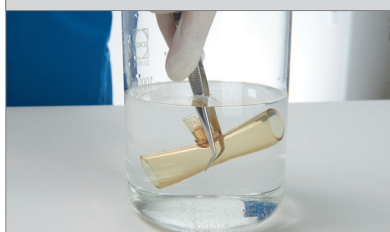

Plonger le capteur de débit dans la solution nettoyante sans laisser de bulles, pendant la durée spécifique à la solution.

- 2** Faire tourner vigoureusement le capteur de débit dans le bain de solution nettoyante au minimum 3 fois. Répéter l'opération à la fin du bain.

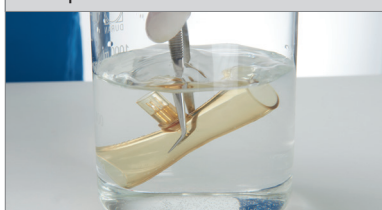

S'assurer que toutes les surfaces (extérieure et intérieure) baignent dans la solution nettoyante.

- 3** Rincer soigneusement à l'eau le capteur de débit (eau potable, au minimum) jusqu'à supprimer entièrement tout résidu de solution nettoyante.



- 4** Préparer la solution désinfectante.




Faire tourner plusieurs fois le capteur de débit dans la solution désinfectante, pendant la durée spécifique à la solution.
S'assurer que toutes les surfaces (extérieure et intérieure) baignent dans la solution.

- 5** Rincer soigneusement à l'eau le capteur de débit (eau potable, au minimum) jusqu'à supprimer entièrement tout résidu de désinfectant.



Vérifier que le capteur de débit est propre et en bon état.

- 6** Égoutter soigneusement le capteur de débit.

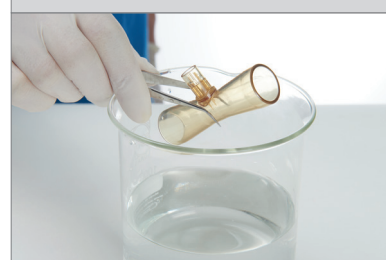

Faire sécher à l'air le capteur de débit au moins 30 minutes.

En cas d'utilisation d'un produit deux-en-un (nettoyant et désinfectant), suivre les mêmes indications (deux trempages).







Dräger Savina® 300

Consignes de retraitement

Nettoyage et désinfection manuels



Aperçu des consignes de retraitement :

	Nettoyage et désinfection manuels	Nettoyage et désinfection en machine	Stérilisation
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✗	✓
	✓	✗	✗

* Il est également possible d'employer des valves expiratoires à usage unique.

Nettoyage et désinfection en machine :

Placer correctement le capteur dans le panier.

S'assurer que :

- toutes les surfaces (extérieure et intérieure) sont trempées ;
- l'eau peut se vidanger sans obstruction.

Stérilisation :

S'assurer que le capteur est en bon état ; si nécessaire, le remplacer.

Pour cette catégorie de produits, la stérilisation est autorisée, mais non obligatoire.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter les instructions d'utilisation.

Ces consignes ne remplacent pas les instructions de la notice d'utilisation. Il faut toujours respecter les instructions d'utilisation et les règles en vigueur dans l'établissement hospitalier.

Destination : Professionnels de Santé

Classe du dispositif médical : IIb

Organisme notifié : TÜV SÜD Product Service GmbH

Information pour le bon usage du dispositif médical :

merci de prendre impérativement connaissance des instructions disponibles dans la notice d'utilisation du produit.

Fabricant :

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55

23558 Lübeck, Allemagne