

Comprobación de la batería configurable

es Anexo, página 2

ADVERTENCIA

Para utilizar este dispositivo médico de forma correcta, lea y cumpla las instrucciones de uso y este anexo.

Anexo a las instrucciones de uso
Evita Infinity V500
Evita V300
Babylog VN500

Anexo a las instrucciones de uso

ADVERTENCIA

Para utilizar este dispositivo médico de forma correcta, lea y cumpla las instrucciones de uso y este anexo.

Instrucciones de uso	Número de referencia	Edición
Evita Infinity V500 SW 2.n	9052163	6 – 2016-04
Evita V300 SW 2.n	9052998	3 – 2016-04
Babylog VN500 SW 2.n	9038985	6 – 2016-04

- Guarde este anexo junto con las instrucciones de uso. Este anexo actualiza la información de las instrucciones de uso en los siguientes capítulos.

Comprobación de la disponibilidad operacional

La comprobación del sistema se compone de los siguientes elementos:

- Comprobación del dispositivo
- Comprobación del circuito respiratorio

La función **Comprob. batería** puede configurarse. Para más información sobre la comprobación de la batería, consulte las instrucciones de uso.

Comprobación de la batería


Configuración de la comprobación de la batería

La función **Comprob. batería** puede activarse o desactivarse en **Configuración sistema... > Estado del sistema**.


NOTA

La función **Ayuda** no proporciona ninguna información sobre cómo activar o desactivar la función **Comprob. batería**.

- 1 Pulse el botón **Configuración sistema...** en la barra del menú principal.
- 2 Pulse la pestaña **Estado del sistema** (A).
- 3 Pulse la pestaña **Comprob. batería** (B).
- 4 Introduzca la contraseña y confirme con **Intro**.
- 5 Pulse el botón **Activado** (C) o el botón **Desac.** (D) y confirme con el mando rotatorio.

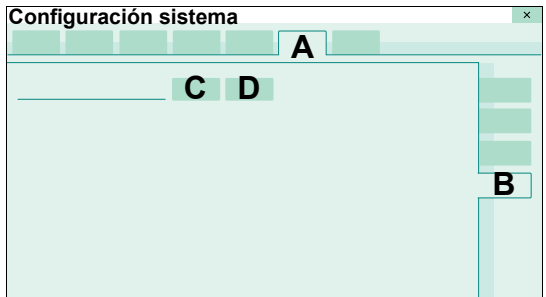

Los siguientes elementos no están disponibles cuando se desactiva la comprobación de la batería:

- La página de comprobación de la batería
- El campo de parámetros **Batería**
- Alarma: **Comprobación de batería en curso**
- Alarma: **Comprobación de batería recomendada**
- El símbolo  parpadeando, que indica lo siguiente:
 - La comprobación de la batería está en marcha.
 - El intervalo para la comprobación de la batería ha expirado.
 - La última comprobación de la batería ha fallado.
 - Se recomienda la sustitución de la batería.

Requisitos previos para la comprobación de la batería durante la ventilación del paciente

- El dispositivo está conectado a la alimentación de red.

NOTA

La comprobación de la batería puede realizarse independientemente del estado operativo del dispositivo. Preste atención al indicador del estado de carga en caso de que la comprobación de la batería se realice cuando el paciente está siendo ventilado.

Requisitos previos para la comprobación de la batería cuando el pulmón de prueba está conectado al dispositivo

- El dispositivo está conectado a la alimentación de red.

Tenga en cuenta lo siguiente al realizar la comprobación de la batería:

- El dispositivo está preparado y listo para su uso.
- El pulmón de prueba está conectado.
- Se ha ajustado un patrón de ventilación, p.ej.:
 - PC-AC
 - FiO₂ = 21 %
 - FR = 12/min
 - P_{insp} = 20 mbar (o hPa o cmH₂O)
 - PEEP = 5 mbar (o hPa o cmH₂O)
- Se inicia la ventilación.

Intervalos de mantenimiento

Componente	Intervalo	Medida	Personal responsable
Baterías	Cada 2 años o según el resultado de la comprobación de la batería	Sustituir	Expertos



Directiva 93/42/CEE
relativa a los productos sanitarios



Fabricante

Drägerwerk AG & Co. KGaA



Moislinger Allee 53 – 55
D-23542 Lübeck
Alemania



+49 451 8 82-0

FAX

+49 451 8 82-20 80



<http://www.draeger.com>

9056032 – es

© Drägerwerk AG & Co. KGaA

Edición/Edition: 1 – 2017-03

Dräger se reserva el derecho a realizar
modificaciones en el dispositivo médico sin
previo aviso.

