


Aanvullingsdocument

Infinity[®] Acute Care System

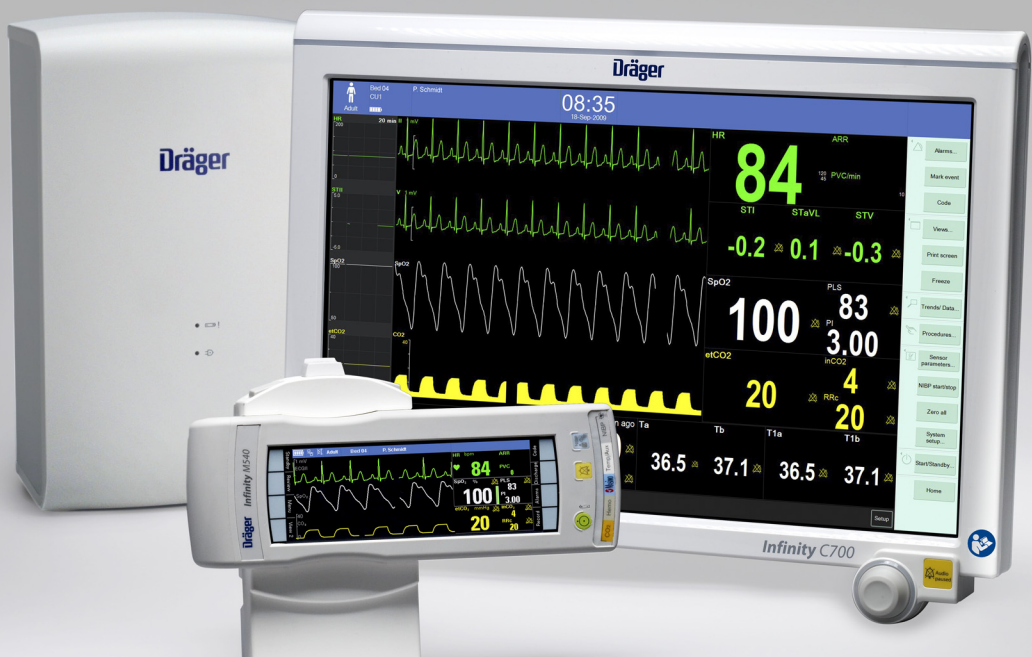

WAARSCHUWING

Voor het juiste gebruik van dit medische apparaat deze gebruiksaanwijzing lezen en strikt opvolgen.

Infinity[®] Acute Care System Software VG7.1

Inhoud van dit document

Dit aanvullingsdocument actualiseert de gebruiksaanwijzing voor de Infinity Acute Care System (IACS) VG7.n. Combineer dit aanvullingsdocument met de volgende documenten om de gebruiksaanwijzingen compleet te maken:

- Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System Bewakingstoepassingen Software VG7.n
- Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System Bewakingsaccessoires Software VG7.n
- Gebruiksaanwijzing Infinity Acute Care System Infinity M540 patiëntmonitor Software VG7.n
- Aanvullingsdocument Infinity Acute Care System VG7.n

Typografische conventies

- 1** De volgorde van handelingen wordt met opeenvolgende nummers aangegeven. Elke nieuwe reeks handelingen begint weer met "1".
- Afzonderlijke handelingen of verschillende keuzemogelijkheden voor handelingen worden met opsommingstekens aangegeven.
- Streepjes geven een reeks van gegevens, opties of voorwerpen in een lijst aan.
- (A) Letters tussen haakjes verwijzen naar elementen in de relevante afbeelding.
- A** Met letters in afbeeldingen worden elementen aangeduid waarnaar in de tekst wordt verwezen.
- > Het "groter dan"-symbool geeft het navigatiepad in een dialoogvenster aan.
Vet en cursief gedrukte tekst duidt op labels op het apparaat en teksten die op het scherm worden weergegeven.

Handelsmerken

Handelsmerken van Dräger

De handelsmerken zijn geregistreerd in de volgende landen:

Handelsmerk	Land
Infinity®	EU, VS, Australië

Definities veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING

Een **WAARSCHUWING** geeft belangrijke informatie over een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of overlijden tot gevolg kan hebben.

LET OP

Een opmerking die door LET OP wordt voorafgegaan, bevat belangrijke informatie over een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in licht tot middelzwaar letsel bij de gebruiker of de patiënt of in schade aan het medische apparaat of andere eigendommen.

OPMERKING

Een **OPMERKING** geeft aanvullende informatie die is bedoeld om ongemakken tijdens het gebruik te vermijden.

Definitie van doelgroepen

De doelgroepen voor dit product omvatten gebruikers, onderhoudspersoneel en experts. Deze doelgroepen moeten instructie hebben ontvangen in het gebruik van het product, en moeten de benodigde training hebben ondergaan en kennis bezitten voor het gebruiken, installeren, herprepareren, onderhouden of repareren van het product.

Het product mag uitsluitend door de gedefinieerde doelgroepen worden geïnstalleerd, geherprepareerd, onderhouden of gerepareerd.

Gebruikers

Gebruikers zijn personen die het product gebruiken in overeenstemming met het beoogde gebruik.

Servicepersoneel

Onderhoudspersoneel zijn personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het product. Onderhoudspersoneel dient te zijn geschoold in het onderhouden van medische apparatuur en het installeren, voorbereiden voor hergebruik en onderhouden van het product.

Experts

Experts zijn personen die toestemming hebben voor het uitvoeren van reparaties of complex onderhoudswerk aan het product. Experts moeten beschikken over de noodzakelijke kennis en ervaring met complexe onderhoudswerkzaamheden aan het product.

Extern apparaat opnieuw verbinden

Met de functie **Opnieuw verbinden met extern apparaat** kan een gebruiker een onderbroken verbinding met serieel aangesloten externe apparaten herstellen.

OPMERKING

De functie **Opnieuw verbinden met extern apparaat** is alleen bedoeld om een onderbroken verbinding met serieel aangesloten externe apparaten te herstellen. De functie heeft geen effect op via SDC aangesloten externe apparaten.

Opnieuw verbinden met externe apparaten toestaan

Configureer **Opnieuw verbinden met extern apparaat** als volgt:

- 1 Selecteer **Systeem set-up...** op de hoofdmenubalk.
- 2 Open het tabblad **Biomed**.
- 3 Geef het wachtwoord op en selecteer **Enter**.
- 4 Open het tabblad **Patiënt monitor**.
- 5 Selecteer **Ingeschakeld** naast **Opnieuw verbinden met extern apparaat toestaan**.

Extern apparaat opnieuw verbinden

Biomed

System setup

The screenshot shows the 'Biomed' tab in the 'System setup' menu. The 'Allow external device reconnect' option is highlighted with a box, and a line connects it to the text 'Opnieuw verbinden met extern apparaat toestaan'. Another line connects the 'Disabled' button to the text 'Ingeschakeld'. A vertical sidebar on the right contains various setup options: Country, Units of measure, Patient monitor, Name service, Network setup, Printer setup, Recorder setup, Service, System integration, and IT setup.

Setting	Option 1	Option 2
Change clinical password		
Change biomedical password		
Simulation (basic)	On	Off
French NFC mode	On	Off
External display	Clone	Indep. display
Patient profile selection	On	Off
Adopt OR alarms	Auto	Manual
Adopt cardiac bypass	Auto	Manual
Allow external device reconnect	Enabled	Disabled
Restore factory settings	Restore factory settings	

Opnieuw verbinden met extern apparaat toestaan

Ingeschakeld

Opnieuw verbinden met externe apparaten uitvoeren

Voer, na inschakeling **Opnieuw verbinden met extern apparaat** in het menu Biomed, als volgt het opnieuw verbinden met externe apparaten uit:

- 1 Selecteer **System set-up...** op de hoofdmenubalk.

System setup ✕

Screen Setup | Alarms | Recorders/ Reports | Biomed | Profiles

Monitoring sweep speed [mm/s]	25	General settings
Respiratory sweep speed [mm/s]	6.25	Auto view
Anesthesia sweep speed [mm/s]	6.25	Views
Show parameter units	On Off	Config. buttons
Attention tone volume [%]	40	Multi-tab split screen
Brightness [%]	100	View editor
Night time	20 : 00 to 7 : 00	
External device reconnect <small>Communication with all external serial devices is temporarily lost during this process.</small>	Reconnect	

Opnieuw verbinden

- 2 Open het tabblad **Scherm set-up**.
- 3 Open het tabblad **Algemene instellingen**.
- 4 Selecteer de toets **Opnieuw verbinden**.

Ontslagfunctie op de M540

Het pop-upvenster **Opnieuw verbinden met extern apparaat bevestigen** verschijnt:

Confirm external device reconnect



Connection to all external devices may be unavailable for up to three minutes.

Cancel

Reconnect

5 Selecteer **Opnieuw verbinden**.

De verbinding met alle externe apparaten kan maximaal 3 minuten niet beschikbaar zijn.

OPMERKING

Het verbinden of onderbreken van een extern apparaat met de Cockpit heeft geen invloed op de bewaking.

Ontslagfunctie op de M540

Wanneer een M540 aan de Cockpit wordt gekoppeld, is de functietoets Ontslag op de M540 en Cockpit tijdelijk niet beschikbaar, tot de verbinding met de Cockpit is voltooid.

Nieuwe alarmconditie voor M540

Prioriteit	Bericht	Oorzaak	Oplossing
Geen	Offline	De communicatie tussen een gekoppelde M540 en het netwerk is onderbroken.	<ul style="list-style-type: none">– Zet de M540 uit en opnieuw aan.– Neem contact op met het door Dräger gemachtigde servicepersoneel.

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten.

Deze bladzijde is met opzet leeg gelaten.

Dit aanvullingsdocument is alleen van toepassing op

Infinity® Acute Care System VG7.1

met het serienummer:

Wanneer geen serienummer ingevuld is door Dräger, wordt dit aanvullingsdocument uitsluitend ter algemene informatie beschikbaar gesteld en is dit niet bedoeld voor gebruik in combinatie met een specifiek medisch apparaat. Dit aanvullingsdocument is uitsluitend geleverd ter informatie van de klant en wordt zonder verzoek van de klant niet bijgewerkt of ingeruild.



Richtlijn 93/42/EG


betreffende medische hulpmiddelen



Fabrikant:

Draeger Medical Systems, Inc.

3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042
VS
(215) 721-5400
(800) 4DRAGER
(800 437-2437)

FAX (215) 723-5935
 <http://www.draeger.com>



Distributie in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika, Azië en het Stille Oceaan-gebied door



Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck
Duitsland
+49 451 8 82-0



FAX +49 451 8 82-20 80



<http://www.draeger.com>

3703351 – RI 02 nl
© Drägerwerk AG & Co. KGaA
Uitgave/Edition: 1 – 2019-01

Dräger behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het apparaat.

