

Una perspectiva higiénica: Dräger Alcotest Portátil

Los productos de Dräger Alcotest ayudan a los usuarios de todo el mundo. Son fáciles de usar y permiten al usuario recoger una muestra de aliento y analizarla rápidamente. La muestra se recoge de forma no invasiva y el proceso está diseñado para mitigar la mayoría de los problemas de higiene y seguridad.



Alcotest Portátil

Nuestras boquillas de un solo uso y nuestros dispositivos están diseñados para evitar problemas de higiene para el donante y el usuario. Las pruebas seguras e higiénicas tanto para el operador como para el donante son importantes para Dräger. La seguridad comienza con el diseño de los dispositivos de Alcotest. El aliento exhalado fluye por la parte superior del dispositivo y sólo se recoge una pequeña muestra de este flujo para ser analizada por el dispositivo Alcotest. El Alcotest 7510 también tiene un sistema especial de expulsión de la boquilla que permite una rápida expulsión de la boquilla sin tener que tocarla.

Boquillas

Los dispositivos de Dräger Alcotest funcionan con boquillas de un solo uso*. La posición de la boquilla desechable y la empuñadura moldeada proporcionan una distancia segura e higiénica entre la mano del operador y la del donante. Las boquillas tienen un espaciador especial para evitar que los labios del donante hagan contacto con el instrumento. Todas las boquillas están disponibles con una válvula antirretorno que impide que el aliento exhalado sea inhalado de nuevo por el donante. Dräger recomienda el uso de estas boquillas para la protección del operador y del donante


* El Alcotest 3820 y el Alcotest 5000 son excepciones. Sus boquillas no tienen que ser cambiadas entre cada prueba. El Alcotest 3820 es para uso privado y generalmente el dueño se hace las pruebas a sí mismo. La boquilla se puede cambiar cuando varios donantes necesitan usar el dispositivo. Por favor, consulte el embudo especial para el Alcotest 5000 a continuación.

Procedimiento de prueba

El diseño de los dispositivos de Alcotest asegura que el donante se posicione en un ángulo de 90° con respecto al operador. El flujo respiratorio no está dirigido al operador



Alcotest 5000

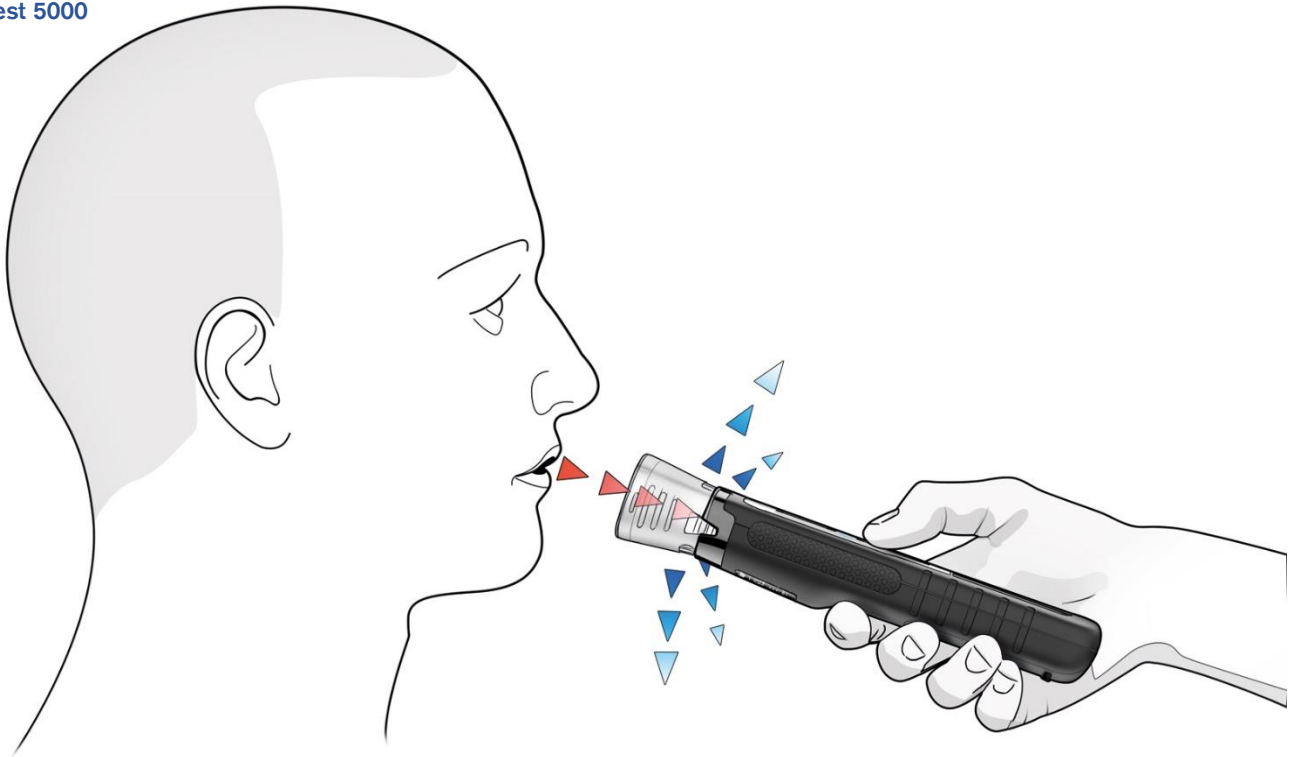

El Dräger Alcotest® 5000 es un alcoholímetro de alta velocidad muy fiable con un embudo especial sin contacto. Este embudo especial reduce al mínimo el flujo de retorno del aire espirado, reduciendo el riesgo de infección de los sujetos de prueba posteriores.

El Alcotest 5000 realiza las pruebas sin necesidad de contacto físico entre el dispositivo y el sujeto de la prueba. No hay necesidad de cambiar de boquilla entre las pruebas ya que los sujetos simplemente soplan en un embudo. El diseño único del embudo previene el reflujos del aliento exhalado del sujeto y mitiga la transmisión de cualquier patógeno de los sujetos de prueba anteriores a un sujeto posterior.

Después de su uso, el accesorio del embudo se puede cambiar fácilmente, lo que garantiza una solución higiénica.

El Alcotest 5000 se puede fijar a cualquier palo de autocontrol estándar con un tornillo de 1/4 de pulgada. El aumento de la distancia permite que el dispositivo se utilice de forma segura con un bajo riesgo de que la contaminación pase del sujeto al operador.



Seguir las normas generales de seguridad sigue siendo la mejor salvaguardia. Por favor, consulte las directrices de su organización de salud y sítalas.

CORPORATE HEADQUARTERS
 Drägerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23560 Lübeck, Germany

www.draeger.com