

Infinity MultiView ViewStation

MultiView ViewStation es un sistema de monitorización remoto para la estación de trabajo MultiView. Es ideal para las unidades de cuidados descentralizadas o para las áreas clínicas en el hospital en las que no son necesarias las alarmas sonoras. MultiView ViewStation muestra los datos de la cabecera y de telemetría Infinity de hasta 16 pacientes, incluyendo formas de onda y parámetros en tiempo real, datos del ventilador, tendencias y formas de onda guardadas, datos de filiación y ajustes del paciente. Gracias a su capacidad de configurar la visualización, realizar informes y visualizar los datos completos y de sucesos, incluidas las mediciones del calibrador, MultiView ViewStation proporciona gran cantidad de información tradicionalmente reservada a la estación central de enfermería.

- Acceso en tiempo real a la información de monitorización del paciente en cualquier punto del hospital
- Información en forma de gráfico o tabla de las tendencias de 24 ó 72 horas
- Acceso intuitivo mediante "señalar y activar" a todas las funciones del sistema
- "Pizarra blanca" electrónica para introducir notas de la forma habitual
- VentCentral™ permite una gestión completa de la ventilación

Especificaciones del producto

Pantalla

Tipo: 432 mm (17 in) o superior CRT o TFT

Resolución: 1280 x 1024 píxeles (resolución nativa)

Los clientes que decidan adquirir las pantallas de PC a distribuidores de otros fabricantes deberán cumplir las especificaciones de pantalla mínimas antes indicadas.

Unidad central de procesamiento (CPU)

Controles del usuario: Ratón y teclado


Unidad de disco: 1,44 MB 3,5 en la unidad de disquete;
CD ROM de velocidad 4x

Conexiones: Dos puertos serie asíncronos, puerto SCSI,
salida de vídeo RGB Ethernet 10BASE-T, teclado

Enfriamiento: Ventilador controlado mediante temperatura

Tamaño (Al x An x F): 159 x 419 x 457 mm

Peso: 15,9 kg

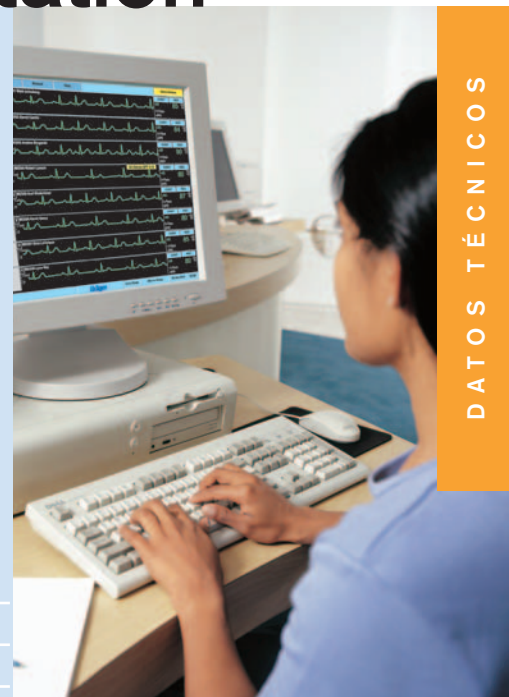

Especificaciones eléctricas

Tensión de entrada:	100 a 125 VAC (nominal); 5,2 amp (máxima) 200 a 245 VAC (nominal); 2,6 amp (máxima)
Frecuencia de la red eléctrica:	50/60 Hz (nominal)
Consumo de energía:	< 200 vatios (totalmente cargado)

Requisitos ambientales

Rango de temperatura:	En funcionamiento: 16 °C a 32 °C. En almacenamiento: 1 °C a 60 °C
Humedad relativa:	En funcionamiento: 8% a 80%, bulbo húmedo a 32 °C En almacenamiento: 5% a 80%, bulbo húmedo a 29 °C
Presión atmosférica:	En funcionamiento: 586 mmHg
Normas:	FCC clase B, CISPR, 22 clase B, EMC y directivas de bajo voltaje, VCCI clase 2, EN 60950, UL 1950

Información sobre pedidos

MultiView ViewStation, 115/ 230 V	5205559
Censo/historial de pacientes	5586271
VentCentral™	7262160

Kits locales

Chino	MS14984
Checoslovaco	MS14388
Danés	5739904
Holandés	5952010
Inglés	4725375
Francés	4729187
Alemán	4729195
Griego	MS14985
Húngaro	MS14389
Italiano	4729179
Japonés	MS14983
Noruego	5739938
Polaco	MS14390
Portugués	7268209
Ruso	5955138
Español	4729351
Sueco	5739912
Turco	5957357

Impresoras

Póngase en contacto con Dräger Medical para obtener una lista de los modelos compatibles de impresoras láser en blanco y negro de 1200 x 1200 ppp. Los clientes que decidan adquirir las impresoras a distribuidores de otros fabricantes deberán cumplir las especificaciones de impresora mínimas.

El registrador de 2 canales R50 imprime sucesos, alarmas, formas de onda y tendencias recopilados y guardados por la estación de trabajo MultiView o cualquier monitor conectado a la red Infinity Network.

España:

Dräger Medical Hispania S.A.
c/ Xaudaró n° 5
28034 Madrid
ESPAÑA
Tel: +34-91-728 34 00
Fax: +34-91-358 36 19
E-mail: draegermedical@draeger.es

www.draeger.es

México:

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
MÉXICO
Tel: +52-55-50 20 52 00
Fax: +52-55-50 20 52 11
e-mail: info@draegermedical.com.mx

www.draeger-medical.com.mx

Chile:

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
CHILE
Tel: +562 482 1010
Fax: +562 482 1001
E-mail: info@draegermedical.cl

América Latina:

Dräger Medical AG & Co. KG
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
ALEMANIA
Tel: +49-1805-3 72 34 37
+49-451-882-822
Fax: +49-451-882-2696
E-mail: Business.Support@draeger.com

www.draeger-medical.com



Fabricante:
Dräger Medical Systems, Inc.
Danvers, MA 01923, USA

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical Systems, Inc. está certificado según el anexo II de la directiva 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 13485 y ISO 9001.