

Mascarilla facial completa NovaStar™ NV con válvula antiasfixia



**Máxima comodidad
combinada con un
ajuste personalizado
y un eficaz sellado**

Mascarilla facial completa NovaStar™ NV con válvula antiasfixia

Máxima comodidad combinada con un ajuste personalizado y un sellado eficaz.

La mascarilla facial completa NovaStar™ NV está diseñada para la terapia de ventilación no invasiva. Como la mascarilla cubre la nariz y la boca, facilita una terapia eficaz incluso si se respira por la boca.

El codo blanco incluye una válvula antiasfixia que garantiza un acceso cómodo al aire ambiente en caso de presión reducida (< 3 cm de H₂O). Los puertos para exhalación mantienen la eliminación de CO₂.

La mascarilla facial completa NovaStar NV es reutilizable. Puede reutilizarse 5 veces como máximo.

El indicador de tamaño Dräger ayuda a determinar el tamaño, permitiendo que se desperdicien menos mascarillas. Le ayuda a seleccionar el tamaño de mascarilla correcto para el paciente.

- NovaStar es la primera mascarilla facial completa NV que incluye un cojín relleno de gel de silicona en la mascarilla para uso en centros sanitarios. La estructura flexible y transparente de la mascarilla y el fino cojín de gel se adaptan totalmente a la cara del paciente.

- El aro plegable insertado en la estructura flexible transparente permite doblar la mascarilla y ajustarla para adaptarla a la cara del paciente ("ajuste personalizado"), al mismo tiempo que reduce las fugas.


- La rueda de pulgar permite la adaptación gradual del soporte de la frente para buscar la posición individual más cómoda para conseguir el mejor ajuste y sellado.

- La almohadilla de la frente estabiliza la mascarilla, contiene un cojín suave relleno de gel de silicona y se dobla para adaptarse a la curva de la frente del paciente.

- La mascarilla NovaStar NV tiene pinzas magnéticas para agarrar fácilmente y cerrar de forma segura el accesorio para la cabeza de la mascarilla. Las pinzas magnéticas se autoalinean.

- El accesorio para la cabeza de 4 puntos NovaStar, con dos cintas Velcro® y dos pinzas magnéticas, añade estabilidad. El accesorio para la cabeza de talla única se ajusta a todos los tamaños de la mascarilla facial completa NovaStar NV con válvula antiasfixia.

máxima comodidad
ajuste personalizado

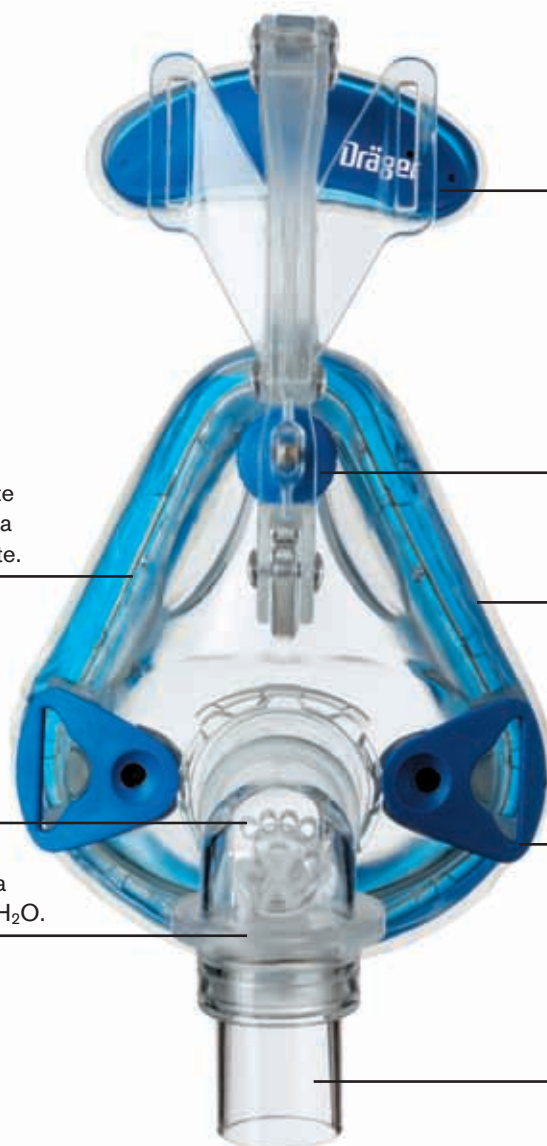

Soporte móvil y almohadilla flexible para la frente para adaptarla a la curva de la frente.

Rueda de pulgar para adaptar gradualmente el soporte de la frente para lograr el ajuste individual más cómodo y un sellado eficaz.

Ajuste personalizado mediante el aro plegable insertado en la estructura flexible transparente.

El cojín relleno de gel de silicona es lo último en comodidad y sellado.

Los puertos para exhalación permiten la eliminación de CO_2 .

Las pinzas magnéticas del accesorio para la cabeza permiten cerrar y retirar fácilmente la mascarilla.

La válvula antiasfixia permite el acceso al aire ambiente si la presión es inferior a 3 cm de H_2O .

Codo móvil de 360° para conseguir mayor flexibilidad.

sellado eficaz

Información para pedidos

Descripción	Unidad empaquetada	Número de referencia
NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con válvula anti-asfixia, talla P	1 pieza	MP01576
NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con válvula anti-asfixia, talla M	1 pieza	MP01577
NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con válvula anti-asfixia, talla G	1 pieza	MP01578
Accesorio para la cabeza para NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con válvula anti-asfixia	1 pieza	MP01584
Indicador de tamaño para NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva*	1 pieza	MP01591

*Este producto no tiene todavía la marca de la CE.

España:

Dräger Medical Hispania S.A.
c/ Xaudaró n° 5
28034 Madrid
ESPAÑA
Tel: +34-91-728 34 00
Fax: +34-91-358 36 19
E-mail: draegermedical@draeger.es

México:

Dräger Medical México, S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
MÉXICO
Tel: +52-55-50 20 52 00
Fax: +52-55-50 20 52 11
e-mail: info@draegermedical.com.mx

Alemania:

Dräger Medical AG & Co. KG
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck
ALEMANIA
Tel: +49-451-882-0
Fax: +49-451-882-2080
E-mail: info@draeger.com

www.draeger.com

Chile:

Dräger Medical Chile Ltda.
Alonso de Córdova 5151, Piso 19
Las Condes
Santiago
CHILE
Tel: +562 482 1010
Fax: +562 482 1001
E-mail: info@draegermedical.cl

Argentina:

Dräger Medical Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro
Buenos Aires
ARGENTINA
Tel: +54-11-4836-8300
Fax: +54-11-4836-8311
E-mail: info-argentina@draeger.com

Fabricante:

Dräger Medical AG & Co. KG
D-23542 Lübeck

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 y ISO 13485.

Este producto todavía no se comercializa en EE.UU. o Canadá.