

# Mascarilla facial completa NovaStar™ NV con codo estándar



**Máxima comodidad  
combinada con un  
ajuste personalizado  
y un sellado eficaz**

## Mascarilla facial completa NovaStar™ NV con codo estándar

**Máxima comodidad combinada con un ajuste personalizado y un sellado eficaz.**

La mascarilla facial completa NovaStar™ NV está diseñada para la terapia de ventilación no invasiva. Como la mascarilla cubre la nariz y la boca, facilita una terapia eficaz incluso si se respira por la boca.

El codo azul indica que la mascarilla no tiene válvula antiasfixia ni puertos para exhalación.

La mascarilla facial completa NovaStar NV es reutilizable. Puede reutilizarse 5 veces como máximo.

El indicador de tamaño Dräger ayuda a determinar el tamaño, permitiendo que se desperdicien menos mascarillas. Le ayuda a seleccionar el tamaño de mascarilla correcto para el paciente.

- NovaStar es la primera mascarilla facial completa NV que incluye un cojín relleno de gel de silicona en la mascarilla para uso en los centros. La estructura flexible y transparente de la mascarilla y el fino cojín de gel se adaptan totalmente a la cara del paciente.

- El aro plegable insertado en la estructura flexible transparente permite doblar la mascarilla y ajustarla para adaptarla a la cara del paciente ("ajuste personalizado"), al mismo tiempo que reduce las fugas.

- La rueda de pulgar permite la adaptación gradual del soporte de la frente para buscar la posición individual más cómoda para conseguir el mejor ajuste y sellado.

- La almohadilla de la frente estabiliza la mascarilla, contiene un cojín suave relleno de gel de silicona y se dobla para adaptarse a la curva de la frente del paciente.


- La mascarilla NovaStar NV tiene pinzas magnéticas para agarrar fácilmente y cerrar de forma segura el accesorio para la cabeza de la mascarilla. Las pinzas magnéticas se autoalinean.

- El accesorio para la cabeza de 4 puntos NovaStar, con dos cintas Velcro® y dos pinzas magnéticas, añade estabilidad. El accesorio para la cabeza de talla única se ajusta a todos los tamaños de la mascarilla facial completa NovaStar NV con codo estándar.

máxima comodidad  
ajuste personalizado



Ajuste personalizado mediante el aro plegable insertado en la estructura flexible transparente.

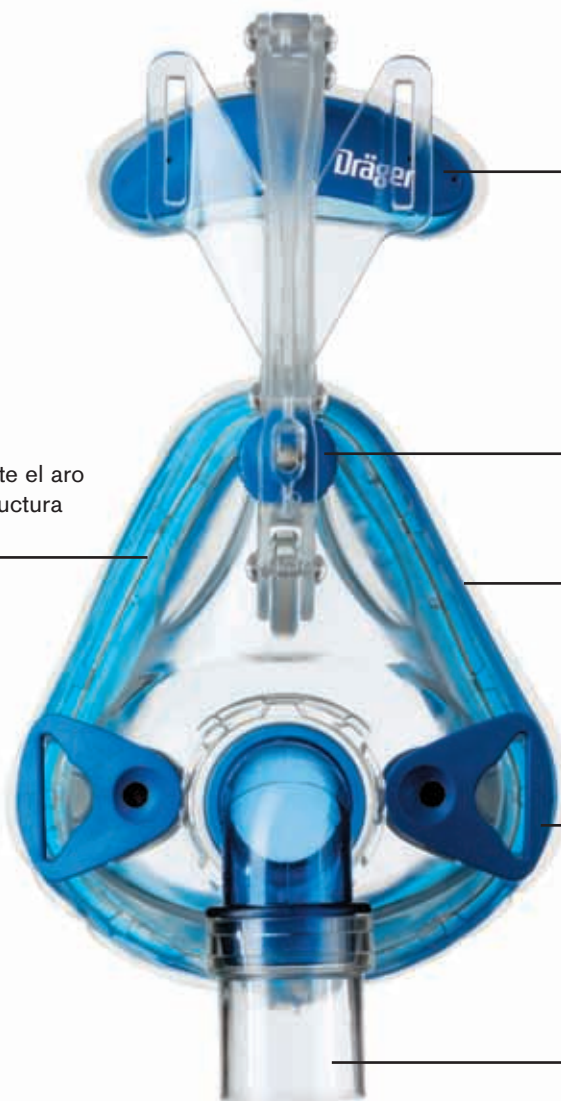

Soporte móvil y almohadilla flexible para la frente para adaptarla a la curva de la frente.

Rueda de pulgar para adaptar gradualmente el soporte de la frente para lograr el ajuste individual más cómodo y un sellado eficaz.

Cojín relleno de gel de silicona, lo último en comodidad y sellado.

Las pinzas magnéticas del accesorio para la cabeza permiten cerrar y retirar fácilmente la mascarilla.

Codo estándar móvil de 360° para conseguir mayor flexibilidad. El codo está coloreado parcialmente en azul transparente para que se identifique inmediatamente que la mascarilla no incluye una válvula antiasfixia.

# sellado eficaz

## Información para pedidos

Descripción	Unidad empaquetada	Número de referencia
NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con codo estándar, talla P	1 pieza	MP01579
NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con codo estándar, talla M	1 pieza	MP01580
NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con codo estándar, talla G	1 pieza	MP01581
Accesorio para la cabeza para NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva con codo estándar	1 pieza	MP01583
Indicador de tamaño para NovaStar™, mascarilla de ventilación no invasiva	1 pieza	MP01591

España:

**Dräger Medical Hispania S.A.**  
c/ Xaudaró n° 5  
28034 Madrid  
ESPAÑA  
Tel: +34-91-728 34 00  
Fax: +34-91-358 36 19  
E-mail: draegermedical@draeger.es

México:

**Dräger Medical México, S.A. de C.V.**  
German Centre  
Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2  
Col. Lomas de Santa Fe  
01210 México D.F.  
MÉXICO  
Tel: +52-55-50 20 52 00  
Fax: +52-55-50 20 52 11  
e-mail: info@draegermedical.com.mx

Alemania:


**Dräger Medical AG & Co. KG**  
Moisinger Allee 53-55  
23542 Lübeck  
ALEMANIA  
Tel: +49-451-882-0  
Fax: +49-451-882-2080  
E-mail: info@draeger.com  
  
www.draeger.com

Chile:

**Dräger Medical Chile Ltda.**  
Alonso de Córdova 5151, Piso 19  
Las Condes  
Santiago  
CHILE  
Tel: +562 482 1010  
Fax: +562 482 1001  
E-mail: info@draegermedical.cl

Argentina:

**Dräger Medical Argentina S.A.**  
Colectora Panamericana Este 1717  
B1607BLF San Isidro  
Buenos Aires  
ARGENTINA  
Tel: +54-11-4836-8300  
Fax: +54-11-4836-8311  
E-mail: info-argentina@draeger.com



Fabricante:

Dräger Medical AG & Co. KG  
D-23542 Lübeck

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 y ISO 13485.

Este producto todavía no cuenta con la marca CE y sólo se puede comercializar en la CE después de haber finalizado la evaluación de conformidad, de acuerdo con la directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE.

Este producto todavía no se comercializa en EE.UU. o Canadá.