

Laringoscopios y estación de carga


La luz adecuada
a cada situación

Amplia posibilidad de elección

Los laringoscopios de Dräger Medical ofrecen una amplia gama de tallas que garantizan que se dispone del instrumento correcto para cada paciente: ya sea pediátrico o adulto. Se puede elegir entre la luz de fibra óptica (FO) y la luz caliente estándar y entre las variadas tallas de palas de tipo MacIntosh o Miller y dos tallas de mangos para cada tipo de luz – todas conformes con las normas internacionales. Dräger Medical le ofrece el equipo necesario para cada situación clínica o de emergencias.

Uso sencillo y mayor seguridad durante la intubación

El diseño ergonómico de las palas y los mangos de los laringoscopios garantiza un uso sencillo: una ventaja para el médico y el paciente, especialmente durante las situaciones de emergencia. Las palas, junto con los mangos, son sencillas de ajustar y también fáciles de limpiar y desinfectar.

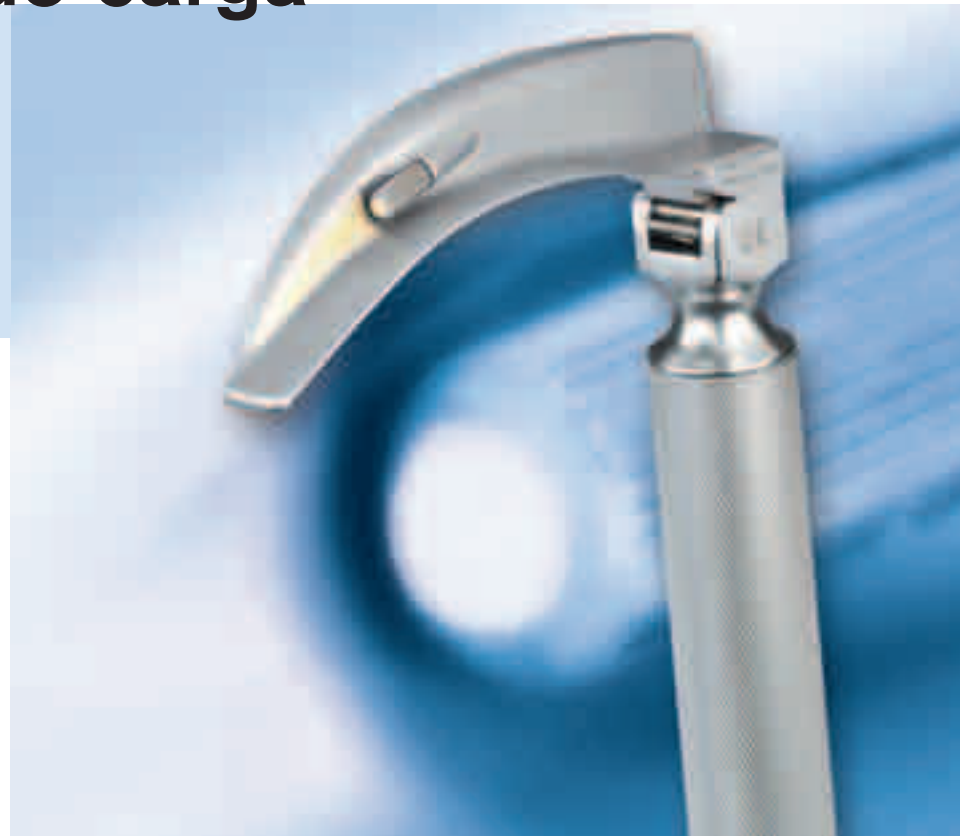

La estación de carga universal

Debe utilizarse con los laringoscopios de fibra óptica de 2,5 V / 3,5 V y con los laringoscopios convencionales de 2,5 V. MedCharge® 3000 es la estación de carga para la fibra óptica y la luz caliente del mango de carga del laringoscopio. Los sistemas electrónicos inteligentes controlan el progreso de las células de la batería recargable durante el proceso de carga. De esta forma se evita la sobrecarga de la batería recargable y la vida útil del acumulador individual se utiliza adecuadamente.

MedCharge® 3000 reconoce el tipo de acumulador, así como su estado de carga y lo adapta individualmente al estado de carga mediante el sistema Microcontrol. Gracias a un adaptador apropiado, se pueden recargar fácilmente también los laringoscopios de otros fabricantes.

Información para pedidos

Laringoscopios estándar de luz caliente	Nº de referencia
Palas	
Pala talla 0 (Mac), 80 x 13	MX 03 302
Pala talla 1 (Mac), 92 x 18	MX 03 303
Pala talla 2 (Mac), 112 x 20	MX 03 304
Pala talla 3 (Mac), 133 x 21	MX 03 305
Pala talla 4 (Mac), 153 x 21	MX 03 306
Pala talla 0 (Miller), 79 x 10	MX 03 307
Pala talla 1 (Miller), 103 x 10	MX 03 308
Pala talla 2 (Miller), 157 x 12	MX 03 309
Mangos	
Mango, adulto 2,5 V, 28 mm diámetro	MX 03 301
Mango, pediátrico 2,5 V, 19 mm diámetro	MX 03 314
Juegos (embalados en cajas)	
Laringoscopios, juego universal, 5 palas ¹⁾	MX 03 300
Laringoscopios, juego adultos, 3 palas ²⁾	MX 03 313
Laringoscopios, juego pediátrico, 3 palas ³⁾	MX 03 312
Repuestos	
Batería de carga, adultos 2,5 V	MX 03 327
Batería de carga, pediatría, 2,5 V	MX 03 315
Bombilla Crypton para palas (size 2 - 5)	MX 03 311
Bombilla Crypton para palas (size 0 -1)	MX 03 316
Estación de carga universal	
Estación de carga MedCharge 3000 "Standard" (versión DIN)	MX 50 028
Estación de carga MedCharge 3000 "GB" (versión GB)	MX 50 029
Adaptador 2,5 V - 3,5 V	a petición
Características	
<ul style="list-style-type: none"> • El proceso de carga se controla en función del estado de la carga de las células de carga. • Carga acelerada hasta que se alcanza el voltaje final de cargado. • Cuando la batería está llena, cambia automáticamente a la carga lenta. • Protección efectiva frente a las sobrecargas. • Inicio automático del proceso de carga cuando el circuito de carga está cerrado, es decir, cuando el mango de carga se ha insertado en la unidad de carga. • Separación galvánica entre la unidad de suministro de energía y la batería mediante un transformador conforme con la norma EN 60335. • Tensión de entrada 230 V +/- 10%, 48-62 Hz. • Suministro eléctrico máx. 200 mA, sinusoidal. • Factor de eficiencia del 90-93%. • Factor de potencia >0,99. • Corriente de carga máx. de hasta 200 mA. • Voltaje de carga máx. de hasta 3,7 V. 	



Información para pedidos

Laringoscopios de fibra óptica	Nº de referencia
Palas	
Pala FO talla 0 (Mac), 83 x 14	MX 03 319
Pala FO talla 1 (Mac), 93 x 15	MX 03 320
Pala FO talla 2 (Mac), 119 x 20	MX 03 321
Pala FO talla 3 (Mac), 133 x 20	MX 03 322
Pala FO talla 4 (Mac), 155 x 20	MX 03 323
Pala FO talla 00 (Miller), 65 x 8,5	MX50052
Pala FO talla 0 (Miller), 79 x 13	MX 03 324
Pala FO talla 1 (Miller), 103 x 15	MX 03 325
Pala FO talla 2 (Miller), 156 x 15	MX 03 326
Pala FO talla 3 (Miller), 193 x 10	MX50053
Pala FO talla 4 (Miller), 203 x 13	MX50054
Mangos	
Mango FO, adulto 2,5 V, 28 mm diámetro	MX 03 318
Mango FO, pediátrico 2,5 V, 19 mm diámetro	MX 03 331
Juegos (embalados en cajas)	
Laringoscopios FO, juego universal, 5 palas ⁴⁾	MX 03 317
Laringoscopios FO, adultos, 3 palas ⁵⁾	MX 03 330
Laringoscopios FO, pediátrico, 3 palas ⁶⁾	MX 03 329
Repuestos	
Bombilla halógena para mango, 2,5 V	MX 03 328
Batería de carga, adultos 2,5 V	MX 03 327
Batería de carga, pediatría, 2,5 V	MX 03 315

¹⁾ contenidos: MX 03 301, MX 03 303, MX 03 304, MX 03 305, MX 03 306, MX 03 307

²⁾ contenidos: MX 03 301, MX 03 304, MX 03 305, MX 03 306

³⁾ contenidos: MX 03 314, MX 03 304, MX 03 307, MX 03 308

⁴⁾ contenidos: MX 03 318, MX 03 320, MX 03 321, MX 03 322, MX 03 323, MX 03 324

⁵⁾ contenidos: MX 03 318, MX 03 321, MX 03 322, MX 03 323

⁶⁾ contenidos: MX 03 331, MX 03 321, MX 03 324, MX 03 325

MedCharge® es una marca comercial registrada de KaWe Germany

España:
Dräger Medical Hispania S.A.
 c/ Xaudaró n° 5
 28034 Madrid
 ESPAÑA
 Tel: +34-91-728 34 00
 Fax: +34-91-358 36 19
 E-mail: draegermedical@draeger.es
 www.draeger.es

México:
Dräger Medical México, S.A. de C.V.
 German Centre
 Av. Santa Fe, 170 Int. 7-2-2
 Col. Lomas de Santa Fe
 01210 México D.F.
 MÉXICO
 Tel: +52-55-50 20 52 00
 Fax: +52-55-50 20 52 11
 E-mail: info@draegermedical.com.mx
 www.draeger-medical.com.mx

Fabricante:
 KaWe
 KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG
 Eberhardstr. 56
 71679 Asperg (Alemania)

El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical AG & Co. KG está certificado según el anexo II de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 y ISO 13485.

Chile:
Dräger Medical Chile Ltda.
 Alonso de Córdova 5151, Piso 19
 Las Condes
 Santiago
 CHILE
 Tel: +562 482 1010
 Fax: +562 482 1001
 E-mail: info@draegermedical.cl

América Latina:
Dräger Medical AG & Co. KG
 Moisinger Allee 53-55
 23542 Lübeck
 ALEMANIA
 Tel: +49-1805-3 72 34 37
 +49-451-882-822
 Fax: +49-451-882-2696
 E-mail: Business.Support@draeger.com

www.draeger.com

