

## Familia de mascarillas ClassicStar® NIV: Mascarillas nasales, con y sin válvula

Mayor comodidad con ajuste anatómico y sellado eficaz. Las mascarillas nasales ClassicStar NIV se han añadido a la gama existente de productos de mascarillas faciales completas ClassicStar NIV.




Las mascarillas faciales completas suelen ser la estrategia de primera línea en la gestión inicial de la insuficiencia respiratoria aguda, ya que cubren tanto la nariz como la boca, de forma que se reducen al mínimo los problemas relacionados con la respiración por la boca. No obstante, las mascarillas nasales se suelen utilizar si la ventilación no invasiva tiene que prolongarse debido a la mejora de la comodidad y la reducción de las complicaciones asociadas a las mascarillas faciales completas. Las mascarillas nasales se suelen preferir para aquellos pacientes en los que la respiración por la boca no es un problema importante.<sup>1)</sup> También pueden proporcionar un apoyo valioso en la terapia de ventilación no invasiva en el entorno del cuidado domiciliario.

Las mascarillas nasales ClassicStar NIV son para su uso con un único paciente. Están disponibles en 3 tamaños.

Las mascarillas sin válvula se han diseñado para los ventiladores que cuentan con una válvula de seguridad integral (sistema de evacuación activa). Las mascarillas sin válvula son adecuadas para los siguientes ventiladores de Dräger: Serie Evita, Savina (ambas con opción NIV) y Carina. La mascarilla con válvula incluye un puerto de exhalación que ofrece un flujo adecuado

para el lavado del CO<sub>2</sub> espirado, y es adecuado para los ventiladores con presión positiva continua en las vías aéreas sin sistema de evacuación activa.

- La mascarilla nasal ClassicStar NIV tiene un cojín relleno de aire que se puede ajustar de forma individual a la cara del paciente. El cojín de la mascarilla se puede inflar o desinflar mediante la bomba de perilla Dräger. Gracias a su adaptabilidad, la mascarilla nasal ClassicStar NIV ofrece mayor comodidad y un sellado eficaz (consulte la pág. 2).
- El soporte y la almohadilla para la frente se pueden ajustar para adaptarse a la curva de la frente del paciente y, por lo tanto, contribuir a mejorar la comodidad del paciente y el sellado de la mascarilla.
- El arnés para la cabeza de 4 puntos facilita una fijación más estable y segura, con lo cual se reduce el movimiento y el desplazamiento de la mascarilla.
- El conector giratorio de la mascarilla ClassicStar se puede mover 360°. Asimismo, este conector giratorio se puede mover en sentido vertical, lo cual proporciona más flexibilidad.

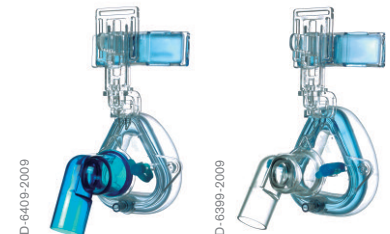

Mascarilla nasal ClassicStar® NIV sin válvula

Mascarilla nasal ClassicStar® NIV con válvula



Mascarilla facial completa ClassicStar® NIV con codo estándar (SE).



Bomba de perilla bidireccional para inflado y desinflado.


<sup>1)</sup> Girault, Christophe, et al.: Interface Strategy during noninvasive positive pressure ventilation for hypercapnic acute respiratory failure, in: Crit. Care Med., 2009, 37(1): 124-131

El indicador de tamaño Dräger le ayuda a determinar la talla correcta de la mascarilla, por lo cual no hay necesidad de abrir el paquete de la mascarilla.

Para encontrar el tamaño correcto de la mascarilla sólo tiene que realizar dos pasos: En primer lugar, la longitud de la nariz del paciente se debe medir sujetando el indicador de tamaño contra el lateral de la nariz del paciente. En segundo lugar, sólo con girar hacia la derecha el indicador de tamaño y sujetarlo contra la parte

inferior de la nariz del paciente puede medir el ancho de la nariz.

Los colores siguen el principio conocido de las luces de los semáforos: rojo para el tamaño pequeño, amarillo para el mediano y verde para el grande. En función del color con el que coinciden la longitud y el ancho de la nariz del paciente, puede seleccionar una mascarilla nasal pequeña, mediana o grande. Las mascarillas se empaquetan de forma individual, totalmente ensamblada y preparada para usarla.

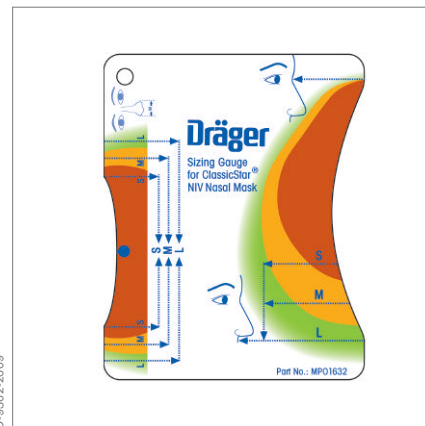

D-9952-2009

### Adaptación individual (conformabilidad) de las mascarillas nasales ClassicStar® NIV, ventiladas y no ventiladas



D-12187-2009



D-12191-2009



D-12182-2009

La mascarilla se puede ajustar a la cara del paciente aumentando o disminuyendo la cantidad de aire en el cojín de la mascarilla. Después del ajuste, la mascarilla se mantiene en su posición.

### INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

#### Descripción

Mascarilla nasal ClassicStar sin válvula para ventilación no invasiva talla S  
 Mascarilla nasal ClassicStar sin válvula, para ventilación no invasiva talla M  
 Mascarilla nasal ClassicStar sin válvula, para ventilación no invasiva talla L  
 Mascarilla nasal ClassicStar con válvula, para ventilación no invasiva talla S  
 Mascarilla nasal ClassicStar con válvula, para ventilación no invasiva talla M  
 Mascarilla nasal ClassicStar con válvula, para ventilación no invasiva talla L  
 Bomba de perilla bidireccional para inflado y desinflado  
 Indicador de tamaño para las mascarillas nasales ClassicStar NIV con y sin válvula

#### Unidad de embalaje

1 unid.  
 1 unid.  
 1 unid.  
 1 unid.  
 1 unid.  
 1 unid.  
 1 unid.  
 3 unid.

#### Número de referencia

MP01623  
 MP01624  
 MP01625  
 MP01620  
 MP01621  
 MP01622  
 MP01590  
 MP01632

#### SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
 Moislinger Allee 53-55  
 23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

#### ARGENTINA

Dräger Medical Argentina S.A.  
 Colectora Panamericana Este 1717  
 B1607BLF San Isidro  
 Buenos Aires  
 Tel +54 11 48 36-8300  
 Fax +54 11 48 36-8311  
 info-argentina@draeger.com

#### CHILE

Dräger Medical Chile Ltda.  
 Alonso de Córdova 5151, Piso 19  
 Las Condes  
 Santiago  
 Tel +562 482-1000  
 Fax +562 482-1001  
 info.cl@draeger.com

#### COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.  
 Calle 93B# 13-44 Piso 4  
 Bogotá D.C.  
 Tel +57 1 63 58-881  
 Fax +57 1 63 58-826

#### ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.  
 C/ Xaudaró, 5  
 28034 Madrid  
 Tel +34 91 728 34 00  
 Fax +34 91 358 36 19  
 clientesdraegermedical@draeger.com

#### MÉXICO

Dräger Medical México, S.A. de C.V.  
 German Centre  
 Av. Santa Fe, 170 5-4-14  
 Col. Lomas de Santa Fe  
 01210 México D.F.  
 Tel +52 55 52 61 40 72  
 Fax +52 55 52 61 41 32

#### Fabricante:

Dräger Medical GmbH  
 23542 Lübeck, Alemania  
 El sistema de gestión de calidad de Dräger Medical GmbH está certificado según el anexo II.3 de la directriz 93/42/EEC (Productos médicos) y según ISO 9001 e ISO 13485.