


# Dräger DrugTest® 5000 Analysator

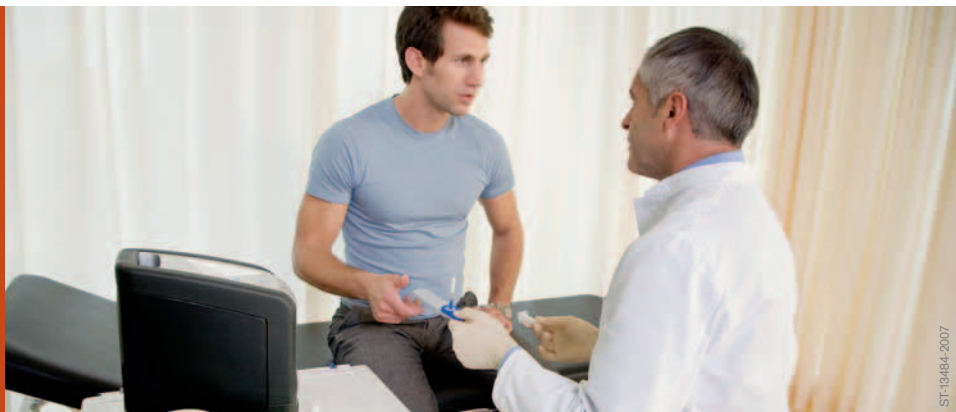

Dräger DrugTest® 5000-systemet består av två huvudkomponenter: Dräger DrugTest® 5000 Test Kits och Dräger DrugTest® 5000-analysator. Systemet erbjuder ett snabbt och exakt sätt att testa orala vätskeprover för droger som amfetamin, designer-amfetaminer, opiater, kokain, metaboliter, benzodiazepiner och cannabis, såväl som precis diagnostisk utvärdering och datahantering. Pålitlig och enkel att använda, Dräger DrugTest® 5000-analysator är en portabel testenhet för droger i orala vätskor som samlas in med hjälp av Dräger DrugTest® 5000 Test-kits.

Analysatorn tillhandahåller en pålitlig och precis analys av Test Kit-provet på bara några få minuter. Det opto-elektroniska systemet med den senaste tekniken väger mindre än 4,5 kg. Den har en menystyrd upplyst färgskärm som är enkel att använda och tydlig att läsa av från alla vinklar.

Operatören behöver inte tolka några skalor eller jämförelser utan får för varje substans ett tydligt och exakt svar: negativt eller positivt. Det eliminerar möjliga misstolkningar. Systemet erbjuder fem förinstallerade språk och ett sjätte valfritt som kan kundanpassas. Analysatorns interna dataminne har plats för upp till 500 individuella provmätningar. Dräger DrugTest® 5000-analysatorn, med sin enkla treknapps kontroll, kan även enkelt

anslutas till en mängd olika enheter för lagring av data såsom en PC, skrivare eller streckkodsavläsare. Förutom att hantera data, kan även den inbyggda självtestfunktionen kontrollera temperatur, optik och tilt-sensorer. Med den lätt konfigurerbara mjukvaran och den flexibla menyn kan också systemet snabbt ställas in för att möta behoven för olika användningsområden. Med sin bärväska och transportbox, passar detta mobila system för kompletta drogtestkontroller vid åtgärder som sker på plats. Utrustningen för kompletta mobila drogtest kan kompletteras med bl.a. med portabel skrivare, tangentbord, DrugTest® 5000 test kits, testenhet för alkohol i utandningsluften, munstycken och system dokumentation

ST-13284-2007



**Det portabla Dräger DrugTest® 5000-systemet:**  
Enkel, snabb, pålitlig och säker upptäckt av droger.

## TEKNISKA DATA

Strömtillförsel	12 V DC (11 TILL 15 V DC)
Strömkonsumtion	normalt 3 A
Dimensioner (W x H x D)	200mm x 250mm x 220mm
Vikt	4.5 kg
Temperatur	under drift: 5 till + 40 °C (+ 41 till + 104 °F)
	Lagring/transport
	- 20 till + 60 °C (- 4 till + 140 °F)

ST-3425-2003



Bärväska med  
komplett system

ST-3441-2003



Transport låda

ST-3451-2003



Kompakt tangentbord

ST-6404-2006



Dräger mobil skrivare

Fuktighetsintervall	5 till 95 % rh, ej kondensation
Gränssnitt	optisk IRDA (skrivare) PS/2, USB Slave
Tidsåtgång för en mätning	5 till 10 minuter, beroende på typ av test
Lagringskapacitet	500 dataset

## BESTÄLLNINGSPÅSLIST

Dräger DrugTest® 5000 Analysator	83 19 900
Inkluderar strömtillförsel, anslutningskabel och bruksanvisning.	

### Tillbehör:

kompakt tangentbord (PS/2, ungefärliga dimensioner 28,2 x 13,2 x 2,4 cm):

"QWERTZ" – Tyskt tangentbord	83 15 095
"QWERTY" – Engelskt tangentbord	83 15 497
"QWERTY" – Franskt tangentbord	83 15 142
Dräger portabel skrivare	83 19 310
Papper för Dräger portabel skrivare (5 rullar)	83 19 002
Bärväska Dräger DrugTest® 5000 Analysator	83 19 960
Transportlåda	83 19 925
Bilkabel 12 V	83 12 166

Anslutningskabel för biluttag/cigarettändare

till Dräger DrugTest® 5000 Analysator

USB-anslutningskabel för kommunikation med en PC	AG 02 661
--	-----------

Streckkodsavläsare	AG 02 491
--------------------	-----------

Modul Dräger DrugTest® 5000	83 19 977
-----------------------------	-----------

Analysatorn, den portabla skrivaren, tangentbordet och engångsartiklar som testkits är alla framtagna för portabel användning. En valbar transportbox och/eller bärväska finns tillgängliga för säker transport av alla systemkomponenter. Tangentbordet gör det möjligt att föra in information gällande testpersonen och systemoperatören, vilket möjliggör skapandet av ett register för dessa data som kan skrivas ut på plats tillsammans med testresultaten för Dräger DrugTest®.

## DOTTERBOLAG

### DANMARK

Dräger Safety Danmark A/S  
Generatorvej 6 B  
2730 Herlev  
Tel +45 4450 0000  
Fax +45 4450 0001  
www.draeger.dk

### NORGE

Dräger Safety Norge A/S  
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo  
Nils Hansensvei 2, 0667 Oslo  
Tel +47 414 02 400  
Fax +47 949 57 855  
www.draeger.no

### SVERIGE

Dräger Safety Sverige AB  
Ögärdesvägen 19 D  
43330 Partille  
Tel +46 31 34090 90  
Fax +46 31 34090 99  
www.draeger.se

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstrasse 1  
23560 Luebeck, Germany  
Tel +49 451 882 0  
Fax +49 451 882 2080  
www.draeger.com