



Vacuümsystemen

Vacuümsystemen

Jarenlange ervaring, bewezen kwaliteit, ononderbroken werking

Belangrijkste eigenschappen

Jarenlange ervaring

Dräger heeft meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen en installeren van volautomatische vacuümsystemen die zijn bedoeld voor medische toepassingen in de operatiekamer, intensive care- of op verpleegafdelingen.

Ononderbroken werking

Vacuümsystemen van Dräger zijn altijd voorzien van drie vacuümpompen, één vacuumtank, een secreetopvang en dubbele bacterienfilterset. Onderhoud en reparaties kunnen hierdoor zonder onderbreking worden uitgevoerd. Dit zorgt voor meer betrouwbaarheid voor de gebruiker. De werking wordt ook voortdurend volledig automatisch gecontroleerd. Defecten worden onmiddellijk weergegeven en kunnen worden doorgegeven naar de afdeling gebouwbeheer van het ziekenhuis.

Bediening

Een regelkast controleert het gehele systeem en garandeert gelijkmatig gebruik van de vacuümpompen door een driewegaansluiting voor de basisbelasting.

Bewezen kwaliteit

Omdat elk systeem bestaat uit een groot aantal aparte onderdelen, worden alleen geteste kwaliteitsproducten gebruikt die voldoen aan de relevante regelgeving en normen. Zowel de volautomatische vacuümsystemen en de compacte vacuümsystemen voldoen aan de specificatie ISO 7396-1. Na de planning en installatie krijgt elk systeem een CE-certificaat.

Compacte vacuümsystemen

Naast volautomatische vacuümsystemen van afzonderlijke onderdelen levert Dräger ook compacte systemen. Deze leveren dezelfde technische kwaliteit, maar door hun kleine omvang nemen deze slechts weinig ruimte in en kunnen deze snel worden geïnstalleerd. Compacte systemen zijn daarom ideaal om in te passen in kleinere ziekenhuizen of op afzonderlijke afdelingen zoals intensive care-afdelingen.

Toebehoren



Componenten voor centrale gassendistributie systemen

- Een selectie van onderdelen die we aanbieden:
- Cilinderverdeelstukken
- Filterstations
- Distributiesystemen
- Gebiedsbesturingseenheden
- Kogelkleppen

Software



GMS Analytics


- Hiermee kunt u de centrale medisch-gasvoorziening in uw ziekenhuis registreren, analyseren en visualiseren.
- Maximaliseert transparantie van het hele systeem bij normaal bedrijf en in crisissituaties
- Maakt energieverbruik, statussen en andere live waarden van de afzonderlijke systemen zichtbaar

Gerelateerde producten



Alarm Management Systeem

- Biedt duidelijke en nauwkeurige informatie over alle aspecten van uw medische gassysteem
- Registreert alle signalen zoals bedrijfs- en noodalarmen
- Meldingen en meetwaarden zijn altijd beschikbaar, precies waar u ze nodig hebt
- Gegevensoverdracht naar externe systemen: interfacemodules voor het verzenden van signalen naar een gebouwbeheersysteem

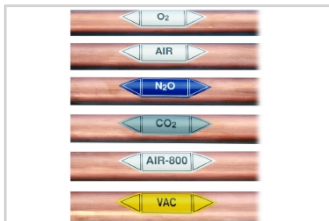

Distributiesystemen

Alleen medische koperbuizen, in combinatie met een onberispelijke installatiekwaliteit en strenge testroutines, bieden de veiligheid die in een ziekenhuisomgeving vereist is.



Secreetopvanginrichting

Een secreetopvanginrichting beschermt het vacuümapparaat van secretie en vloeistoffen.

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht. Hier genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. Handelsmerken kunnen door Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) of zijn filialen in bepaalde landen zijn gedeponeerd, en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status van de handelsmerken van Dräger.

Binnendienst Sales

Medische apparatuur
Tel: +31 (0)79 - 3444 865

Binnendienst Service

Medische apparatuur
Tel: +31 (0)79 - 3444 850

Corporate Headquarters

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck
Germany

