

## Dräger Atlan® A350/A300 麻酔ワークステーション SW 2.0 とオプション

Atlan® A350/A300は、手術室におけるサイバーセキュリティ、セルフテスト、換気テクノロジーを強化する新しいソフトウェアとオプション機能を備えています。Dräger Infinity® Acute Care System (IACS) 患者モニタと併用することで、Atlan® A350/A300は患者アウトカムやワークフロー改善への大きな貢献が期待できます。



D-8419-2022

### 患者アウトカムとワークフローを改善するための機能

#### 肺リクルートメントオプション\*

ICU換気テクニックを採用することで、Atlan® A350/A300の換気性能がさらにアップ。オペ室での肺保護戦略の実施が可能になりました。肺リクルートメント機能は、選択可能な手技で虚脱した肺胞を開くサポートをします。包括的な患者モニタリング機能とともに、個々の患者のニーズに合わせて容易に使用することができるこれらの機能は、麻酔科医による効果的で評価可能な手技の安全な実施をサポートします。

#### 安全性 - 肺を慎重かつ安全に開く

新しいリクルートメント機能が、手技の実施におけるシングルステップ手法とマルチステップ手法を提供します。個々のニーズや肺の状態によって手技を調整するための選択肢が与えられているため、安全なリクルートメントを慎重に行うことが可能です。


#### 直感的 - 複雑さを排除したより直感的な機能

自動操作で円滑にリクルートメント手技 (RM) を行い、その後、換気療法を再開させます。RMの定期的な適用をサポートするリマインダー機能も搭載されています。これらの機能は、ユーザによる操作を最小限に抑え、集中力を高め、作業負荷の軽減につながります。


#### 評価 - アウトカム改善のためのデータ活用

提供される肺メカニクスデータ (コンプライアンストレンドと P/V ループ) および IACS 患者モニタリングパラメータは、これらの手技を適用する対象患者および適用のタイミングの決定とアウトカムの評価に役立ちます。より多くの情報を得ることで、リクルートメント手技実施の透明性と信頼性の向上が望めます。


\* ソフトウェアバージョン2.0以上が必要

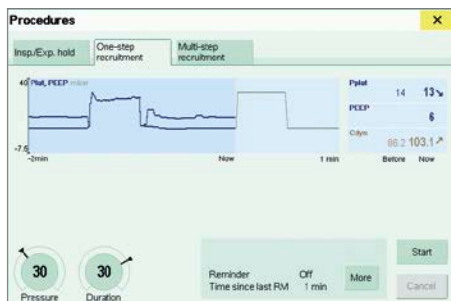

シングルステップ リクルートメント

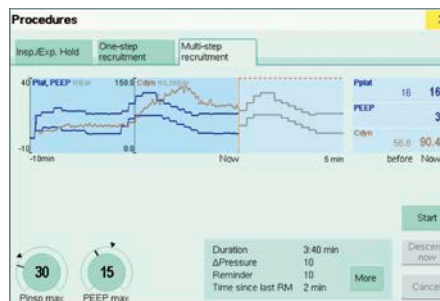

マルチステップ リクルートメント

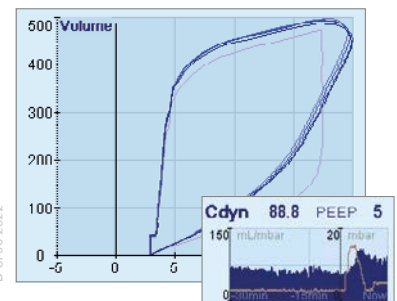

ループとコンプライアンス/PEEPトレンド

D-8784-2022

D-8785-2022

D-8786-2022



D-8412-2022





## ソフトウェア 2.0 に搭載されているその他のソフトウェア拡張機能



D-8415-2022

### Auto-Onオプション

Auto-On機能は、設定した時間にAtlanの自動起動、およびその後のシステムテストの自動実行を提供します\*\*。

- 起動時間の削減により手術室のワークフローをサポートし、他のタスクのための時間を創出
- ストレスのかかる朝の時間帯に、麻酔ワークステーションの準備作業を減らし、スタッフの満足度向上をサポート
- DGAI (ドイツ)、ASA/APSF (米国)、AAGBI (英国) など、各国のガイドラインの準拠に役立つ使用前チェックリストとイラスト付き段階別手順説明書を統合
- 装置の素早い自動起動が可能 (週末などでも)

\* ソフトウェアバージョン2.0以上が必要

\*\* Auto-On機能を有効化する前に、ユーザによる使用前チェックリストの確認作業を実行する必要があります



DMC-100221

### サイバーセキュリティ

The Atlan® A350/A300麻酔器は、危険かつ損害を与えるサイバー攻撃対策を念頭において設計されています。Atlan® A350/A300はまた、以下に挙げた当社の安全開発ライフサイクルに沿って開発されています:

- 開発段階に脆弱性を特定する脅威分析
- ソフトウェア開発における自動コード分析
- 残余脆弱性を発見するための、独立したサードパーティによる侵入テスト
- 署名 (信頼のおける) コードのみを介した装置実行
- 関連脆弱性が検知された場合のパッチ公開
- 製品ライフサイクルを通じた継続的な脆弱性モニタリング

全製品、機能、またはサービスがすべての国で販売されているとは限りません。

記載された商標は、一部の国でのみ登録されており、この資料が公開される国で登録されているとは限りません。

現在の状況については、[www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) でご覧ください。記載内容は、予告なく変更する場合があります。

**製造業者:**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Germany

写真と実物が一部異なる場合があります。  
あらかじめご了承ください。

ドレーゲルジャパン株式会社  
お問い合わせ、ご用命は  
カスタマーサービスへ  
☎ 03-6447-7222  
☎ 03-6447-7220

**本社**  
〒141-0021  
東京都品川区上大崎2-13-17  
目黒東急ビル 4F

**札幌サービスセンター**  
〒060-0007  
北海道札幌市中央区北7条西  
13-9-1  
塚本ビル7号館

**仙台サービスセンター**  
〒981-3133  
宮城県仙台市泉区泉中央1-14-1  
インテレクト21ビル4F

**東京サービスセンター**  
〒135-0047  
東京都江東区富岡2-4-10

**名古屋サービスセンター**  
〒460-0008  
愛知県名古屋市中区栄2-12-12  
アーク栄白川パークビル7F

**大阪サービスセンター**  
〒564-0062  
大阪府吹田市垂水町3-3-17

**広島サービスセンター**  
〒731-0124  
広島県広島市安佐南区大町東  
3-24-16

**福岡サービスセンター**  
〒812-0016  
福岡県福岡市博多区博多駅南  
2-12-3  
トーケン福岡ビル1F

本件に関するお問合せ:  
[www.draeger.com/renrakusaki](http://www.draeger.com/renrakusaki)



ドレーゲル全身麻酔装置 Atlan シリーズ | 30300BZX00062000

Infinity ACS M540 患者モニター | 22400BZX00116000