

Dräger BabyFlow® plus Consumíveis e acessórios

O sistema de suporte ventilatório não invasivo superior, desenvolvido para melhorar o desempenho e o conforto do paciente.



D-488142-2015

Benefícios

Desempenho

O sistema de suporte ventilatório BabyFlow plus foi desenvolvido com base nos resultados de tecnologia de ponta (análise de fluxo computacional) para minimizar o esforço do paciente ao respirar. O adaptador com cabeçote simplificado otimiza a distribuição do fluxo.

Maior conforto para o paciente e o profissional

Queremos que seus pacientes tenham conforto. Quanto menor o desconforto, maior a oportunidade de crescimento e desenvolvimento saudáveis durante o crítico momento de recuperação do paciente.

A angulação ajustável permite adaptar as prongas e máscaras ao paciente, reduzindo vazamentos e garantindo níveis de CPAP mais estáveis. Níveis de CPAP mais estáveis reduzem os níveis de ruídos, fazendo do BabyFlow plus um sistema de suporte ventilatório com baixo nível de ruído que auxilia as práticas de atenção ao desenvolvimento e oferece o melhor tratamento possível para os pacientes pequeninos.

Facilidade de uso

A facilidade para usar o BabyFlow plus em combinação com os componentes inovadores oferece um tratamento eficaz sempre que necessário.

O sistema de suporte ventilatório BabyFlow plus foi desenvolvido para solucionar os problemas dos atuais tratamentos de suporte ventilatório não invasivos. Cada um dos componentes, inclusive as máscaras dimensionadas individualmente e as prongas nasais, foram projetados para melhorar o desempenho e o conforto do paciente.

As mangueiras flexíveis e resistentes a torções garantem o posicionamento ideal do paciente. Os conectores giratórios reduzem ao mínimo as desconexões necessárias do circuito ventilatório, garantindo pressões de CPAP estáveis.


Em combinação com o Dräger Babylog® VN500, o BabyFlow plus atende a uma grande variedade de modalidades para garantir o suporte ventilatório não invasivo. O Babylog VN500 ajusta automaticamente o fluxo conforme os vazamentos existentes para garantir que a pressão de CPAP seja estável e impedir os alarmes incômodos.

* L. Kirchner, M. Wald, V. Jeitler, A. Pollack, "In vitro Comparison of Noise Levels produced by different CPAP generators", in: Neonatology, 2012; 101: 95-100

* Karam et al., "Noise levels during nCPAP are flow-dependent but not device dependent", in: Archives of Disease in Childhood Neonatal Edition, 2008; 93: F 132-F134

Acessórios

D-33872-2015-D-37401-2015

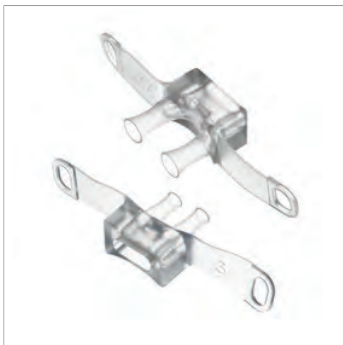

Prongas

As prongas nasais são disponibilizadas em 11 tamanhos e duas larguras diferentes. Em combinação com o BabyFlow plus, elas formam uma vedação eficaz e reduzem a pressão no septo do bebê, minimizando os rompimentos de pele.

D-23992-2016-D-34333-2009



Máscara

As máscaras nasais são disponibilizadas em seis tamanhos diferentes. Os tamanhos P, M, G são máscaras de silicone renomadas e aceitas para pacientes pequenos com até aproximadamente 2 kg (4,41 lb). As novas máscaras para pacientes de 2 kg (4,41 lb) a 5 kg (11 lb) são desenvolvidas para melhorar a eficácia terapêutica e o conforto do paciente usando a tecnologia de varredura 3D da face do bebê. Os foles flexíveis permitem que a máscara encontre a posição natural sobre o nariz do bebê, o que ajuda a minimizar vazamentos e manter o nível consistente de nCPAP.

D-23991-2015



Fixador cefálico

O fixador cefálico prende o BabyFlow plus rápida e facilmente e minimiza os pontos de pressão. Envolve levemente a cabeça do bebê e é preso com fechos ajustáveis. Possui seis tamanhos, para circunferências de cabeça de 17 cm a 42 cm (6,69 pol a 16,54 pol).

D-46861-2015



Gorros de microfibra

Os gorros de microfibra flexíveis e respiráveis são disponibilizadas em sete tamanhos. Os gorros descartáveis incluem alças laterais e superiores para ajudar a prender e estabilizar o BabyFlow plus.

Informações para pedido

BabyFlow® plus descartável

S	20 peças	MP03700
M	20 peças	MP03701
L	20 peças	MP03702

Capas de microfibra

PP	branco	5 peças	84 18 533
S	costura amarela	5 peças	84 18 534
M	costura vermelha	5 peças	84 18 535
G	costura verde	5 peças	84 18 536
GG	costura laranja	5 peças	84 18 537
XGG	costura azul	5 peças	84 18 538
XGG plus	costura branca/preta	5 peças	84 18 539

Equipamento para a cabeça

XXP	5 peças	MP03880
PP	5 peças	MP03881
S	5 peças	MP03882
M	5 peças	MP03883
L	5 peças	MP03884
GG	5 peças	MP03885

Máscara para recém-nascidos

S	10 peças	84 18 491
M	10 peças	84 18 490
G	10 peças	84 18 619
4	10 peças	MP01494
5	10 peças	MP01495
6	10 peças	MP01496

Prongas comuns

Prongas PP	10 peças	84 18 415
Prongas P	10 peças	84 18 605
Prongas M	10 peças	84 18 416
Prongas G	10 peças	84 18 531
Prongas GG	10 peças	84 18 417
Prongas XGG	10 peças	84 18 617

Prongas largas

Prongas 3	10 peças	84 18 603
Prongas 4	10 peças	84 18 607
Prongas 5	10 peças	84 18 609
Prongas 6	10 peças	84 18 611
Conector N macio	20 peças	MP03826

Demo pack BabyFlow® plus, tamanho P

MP03703

BabyFlow® plus, tamanho P, 10 peças

2 x prongas PP

2 x prongas P

2 x prongas M

2 x prongas 3

2 x máscara para recém-nascidos P

2 x máscara para recém-nascidos M

2 x máscara para recém-nascidos G

2 x equipamento para a cabeça XPP
 2 x equipamento para a cabeça PP
 2 x equipamento para a cabeça P
 Fita métrica e gabarito de medição
 Conector N macio, 20 peças

Demo pack BabyFlow® plus, tamanho M

MP03704

BabyFlow® plus, tamanho M, 10 peças
 2 x prongas M
 2 x prongas G
 2 x prongas GG
 2 x prongas 4
 2 x máscara recém-nascido M
 2 x máscara recém-nascido G
 2 x máscara recém-nascido 4
 2 x equipamento para a cabeça P
 2 x equipamento para a cabeça M
 2 x equipamento para a cabeça G
 Fita métrica e gabarito de medição
 Conector N macio, 20 peças

Demo pack BabyFlow® plus, tamanho G

MP03705

BabyFlow® plus, tamanho G, 10 peças
 2 x prongas GG
 2 x prongas XGG
 2 x prongas 5
 2 x prongas 6
 2 x máscara para recém-nascidos 4
 2 x máscara para recém-nascidos 5
 2 x máscara para recém-nascidos 6
 2 x equipamento para a cabeça M
 2 x equipamento para a cabeça G
 2 x equipamento para a cabeça GG
 Fita métrica e gabarito de medição
 Conector N macio, 20 peças

Observações

Observações

Observações

Nem todos os produtos, funcionalidades ou serviços estão à venda em todos os países.
As marcas registadas mencionadas só estão registadas em determinados países e não necessariamente no país em que este material é disponibilizado. Para tomar conhecimento do estado atual, consulte o sítio Web www.draeger.com/trademarks.

SEDE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha
www.draeger.com

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com

BRASIL
Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070
vendas@draeger.com.br

Fabricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemanha

Localize o seu
representante de vendas
regional em:
www.draeger.com/contacto

