

## Полнолицевая маска для NIV ClassicStar® Расходные материалы и принадлежности


ClassicStar NIV — это полнолицевая маска для неинвазивной вентиляции. Поскольку маска закрывает нос и рот, она обеспечивает эффективную терапию, даже если пациент дышит ртом. При этом обеспечивается высочайший комфорт, анатомическое прилегание и надежное уплотнение.

### ClassicStar® SE (со стандартным угловым переходником)

Наличие углового переходника голубого цвета указывает на отсутствие у маски клапана, предотвращающего асфиксию, (AAV) и портов выдоха.

### ClassicStar® AAV (с клапаном, предотвращающим асфиксию)

Бесцветный прозрачный угловой переходник включает в себя клапан, предотвращающий асфиксию, который обеспечивает удобный доступ к окружающему воздуху в случае пониженного давления (<3 см H<sub>2</sub>O). Порты для выдоха поддерживают удаление CO<sub>2</sub> во время неинвазивной вентиляции.

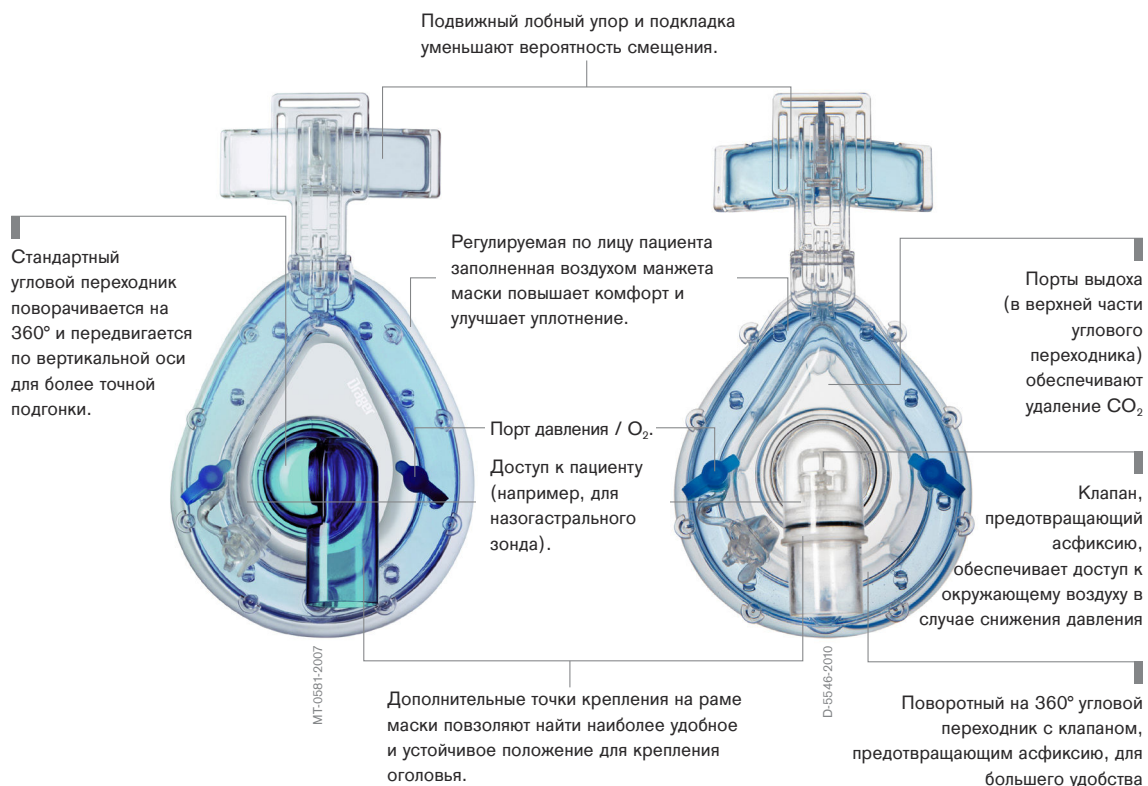

## Преимущества

---

### Полнолицевая маска для неинвазивной вентиляции ClassicStar®

Полнолицевая маска для NIV ClassicStar предназначена для использования одним пациентом.

Шаблоны для определения размера маски Dräger помогают выбрать правильный размер маски, не вскрывая упаковку.

- Полнолицевая маска ClassicStar NIV снабжена заполненной воздухом манжетой, которая подгоняется по форме лица пациента. Манжета маски может быть надута или спущена с помощью специальной помпы. Благодаря возможности регулировки маска ClassicStar обеспечивает повышенный комфорт и эффективное уплотнение.
- Широкая манжета маски ClassicStar увеличивает площадь поверхности, на которую распределяется давление, что помогает избежать раздражения кожи.
- Лобный упор для управления давлением маски на переносицу. Накладка для лоб и опора для лба регулируются с учетом формы лба пациента.
- Держатель маски с креплением в 6 точках обеспечивает ее стабильную и надежную фиксацию, снижая давление и вероятность смещения. В крепеже предусмотрена возможность быстрого снятия маски в экстренных ситуациях.
- Дополнительные точки крепления на раме маски позволяют выбрать наиболее удобное и стабильное положение крепления держателя для каждого пациента.
- Шарнир ClassicStar поворачивается на 360°. Кроме того, шарнир можно перемещать по вертикальной оси (только в версии SE) для более точной подгонки.

## Спецификация заказа

<b>ClassicStar SE</b>	<b>Упаковка</b>	<b>Код заказа</b>
Полнолицевая маска ClassicStar SE для неинвазивной вентиляции со стандартным угловым переходником, размер S	1 шт.	MP01573
Полнолицевая маска ClassicStar SE для неинвазивной вентиляции со стандартным угловым переходником, размер M	1 шт.	MP01574
Полнолицевая маска ClassicStar SE для неинвазивной вентиляции со стандартным угловым переходником, размер L	1 шт.	MP01575
<b>ClassicStar AAV</b>		
Полнолицевая маска ClassicStar AAV для неинвазивной вентиляции с клапаном, предотвращающим асфиксию, размер S	1 шт.	MP01570
Полнолицевая маска ClassicStar AAV для неинвазивной вентиляции с клапаном, предотвращающим асфиксию, размер M	1 шт.	MP01571
Полнолицевая маска ClassicStar AAV для неинвазивной вентиляции с клапаном, предотвращающим асфиксию, размер L	1 шт.	MP01572
Помпа двусторонняя для подкачки манжеты маски	1 шт.	MP01590
Шаблоны для определения размера масок ClassicStar SE и AAV для неинвазивной вентиляции	3 шт.	MP01592

## Примечания

### Примечание

Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер. Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др. уточняйте у представителя производителя или дистрибьютора.

### Штаб-квартира

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Германия  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53 – 55  
23542 Lübeck, Германия

### РОССИЯ

ООО «Дрегер»  
Преображенская площадь, д.8.  
Бизнес Центр ПРЕО8,  
блок «Б», 12 этаж  
Москва, Россия, 107061  
Тел +7 495 775 15-20  
Факс +7 495 775 15-21  
[info.russia@draeger.com](mailto:info.russia@draeger.com)

### Сервисный центр

ул. Новохоловская,  
д.23, стр.1  
Москва, Россия, 109052  
Тел +7 495 775 15-20  
[service.russia@draeger.com](mailto:service.russia@draeger.com)

Найдите вашего  
регионального торгового  
представителя на:  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

