


Оронозальная NIV-маска NovaStar® TS

Расходные материалы и принадлежности

Термостойкие (TS) NIV-маски NovaStar® предназначены для неинвазивной вентиляции. Поскольку маска закрывает нос и рот, она обеспечивает эффективную терапию даже, если пациент дышит ртом. Эта маска обеспечивает максимальный комфорт и эффективное уплотнение благодаря индивидуальной подгонке и манжете с силиконовым гелем.

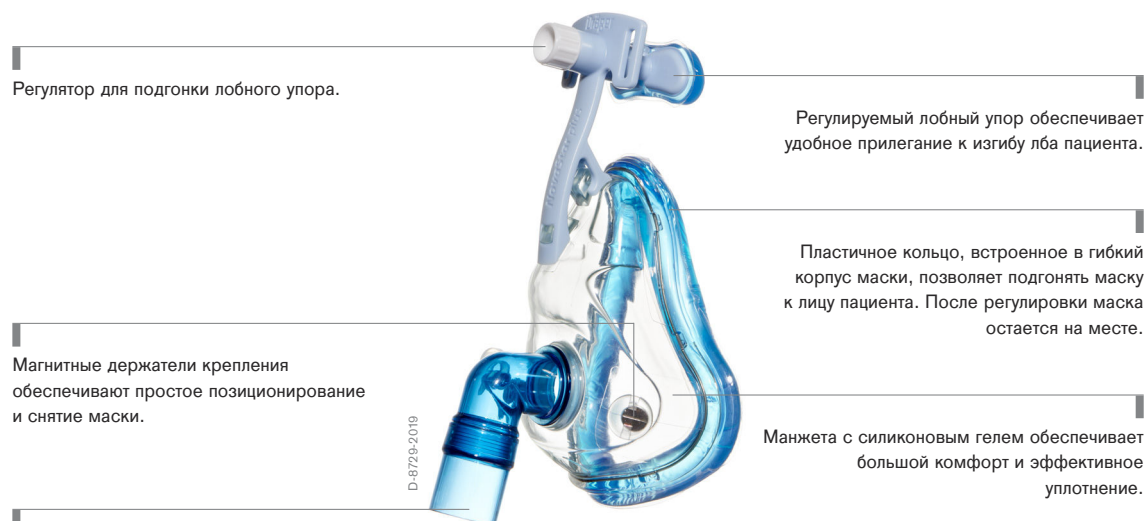

Регулятор для подгонки лобного упора.

Регулируемый лобный упор обеспечивает удобное прилегание к изгибу лба пациента.

Пластичное кольцо, встроенное в гибкий корпус маски, позволяет подгонять маску к лицу пациента. После регулировки маска остается на месте.

Магнитные держатели крепления обеспечивают простое позиционирование и снятие маски.

Манжета с силиконовым гелем обеспечивает большой комфорт и эффективное уплотнение.

Стандартный переходник поворачивается на 360° для большего удобства.



D-8729-2019

NovaStar® TS SE (стандартный угловой переходник)

Наличие углового переходника голубого цвета указывает на то, что у маски нет клапана, предотвращающего асфиксию (AAV) и нет портов выдоха.



D-8728-2019

NovaStar® TS AAV без портов выдоха

Желтый прозрачный угловой переходник снабжен предотвращающим асфиксию клапаном (AAV), обеспечивающим удобный доступ к окружающему воздуху при пониженном давлении (< 3 см H₂O).



D-8730-2019

NovaStar® TS AAV

Белый прозрачный угловой переходник включает в себя предотвращающий асфиксию клапан (AAV), обеспечивающий удобный доступ к окружающему воздуху при пониженном давлении (< 3 см H₂O). Порты выдоха обеспечивают удаление CO₂ при неинвазивной вентиляции

Преимущества

NIV-маска NovaStar TS

Маски NovaStar TS NIV могут быть многократно использованы для различных пациентов. Маски можно дезинфицировать термически (горячим паром при заданной температуре) или химически с применением указанных дезинфицирующих средств (см. главу «Указания по очистке и дезинфекции» в руководстве по использованию).

Шаблоны для определения размера маски Dräger помогают выбрать правильный размер маски, поэтому нет необходимости открывать упаковку маски.

- Маски NovaStar TS NIV представляют собой ороназальные маски (покрывающие рот и нос) с очень мягкой манжетой, наполненной силиконовым гелем, для использования в медицинских учреждениях.
- Пластичное кольцо, встроенное в гибкий прозрачный корпус маски, позволяет сгибать маску и регулировать ее размер индивидуально для лица пациента ("индивидуальная подгонка"). Эта индивидуальная подгонка сводит к минимуму утечку и обеспечивает максимальный комфорт.
- Регулятор позволяет непрерывно подстраивать лобный держатель, чтобы найти наиболее удобное положение для вашего пациента.
- Лобная подкладка стабилизирует маску; она снабжена мягкой манжетой с силиконовым гелем и изгибается в соответствии с изгибом лба пациента.
- Магнитные зажимы обеспечивают простое и безопасное крепление масок NovaStar TS NIV. В случае необходимости, самоустанавливающиеся магнитные зажимы можно быстро открыть или надежно закрыть.

Спецификация заказа

Оронозальная NIV-маска NovaStar® TS, SE	Упаковка	Код заказа
NovaStar® TS, со стандартным угловым переходником, многоразовая, размер S	1	MP01579
NovaStar® TS, со стандартным угловым переходником, многоразовая, размер M	1	MP01580
NovaStar® TS, со стандартным угловым переходником, многоразовая, размер L	1	MP01581
NovaStar® TS, со стандартным угловым переходником, многоразовая, размер XL	1	MP04705
Оронозальная NIV-маска NovaStar® TS, AAV	Упаковка	Код заказа
NovaStar® TS, с AAV, многоразовая, размер S	1	MP01576
NovaStar® TS, с AAV, многоразовая, размер M	1	MP01577
NovaStar® TS, с AAV, многоразовая, размер L	1	MP01578
NovaStar® TS, с AAV, многоразовая, размер XL	1	MP04706
Оронозальная NIV-маска NovaStar® TS, AAV – без портов выдоха.	Упаковка	Код заказа
NovaStar® TS, AAV без портов выдоха, многоразовая, размер S	1	MP04701
NovaStar® TS, AAV без портов выдоха, многоразовый, размер M	1	MP04702
NovaStar® TS, AAV без портов выдоха, многоразовая, размер L	1	MP04703
NovaStar® TS, AAV без портов выдоха, многоразовая, размер XL	1	MP04704
Головной держатель NIV-маски NovaStar® TS	1 шт.	MP01583
Магнитные зажимы для головных держателей NovaStar® TS	4 шт.	MP01585

Примечания

Примечание

Представленная в данной брошюре информация носит справочный характер. Сведения об актуальной спецификации, технических характеристиках и др. уточняйте у представителя производителя или дистрибьютора.

Штаб-квартира

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53 – 55
23542 Lübeck, Германия

РОССИЯ

ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр

ул. Новохоловская,
д.23, стр.1
Москва, Россия, 109052
Тел +7 495 775 15-20
service.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

