


## NovaStar® plus NIV orr-száj maszk Tartozékok és fogyóanyagok

A NovaStar® plus NIV maszk újrahasználható, és nem invazív lélegeztetési terápiára készült. Mivel a maszk takarja az orrot és a szájat, még szájlégzés esetén is támogatja a hatékony terápiát. Ez a termékcsála személyre szabott illeszkedésének és szilikon gélpárnájának köszönhetően nagyon kényelmes, és hatékony tömítést biztosít.



**NovaStar® plus SE (normál könyökelem)**  
A kék könyökelem azt jelzi, hogy a maszkon sem fulladás elleni szelep, sem kilégzési port nincs.

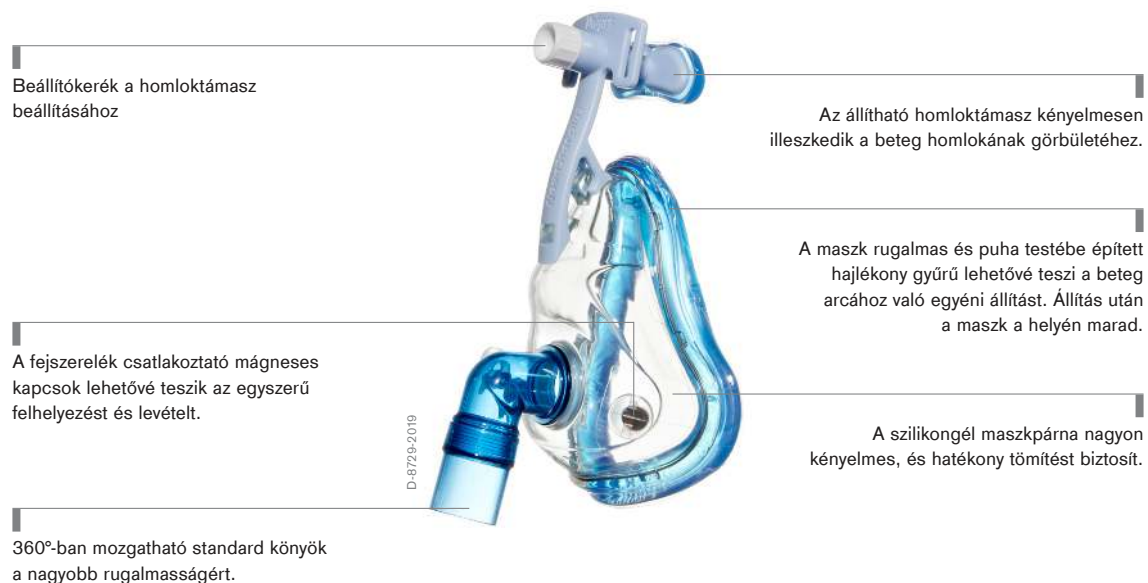

**NovaStar® TS AAV**  
A fehér átlátszó könyökelemen fulladás elleni szelep (AAV) található, amely csökkenti a nyomást (<3 H<sub>2</sub>Ocm) esetén kényelmes hozzáférést biztosít a helyiség levegőjéhez. A kilégzési portok fenntartják a CO<sub>2</sub>-eliminációt nem invazív lélegeztetés során.

## Előnyök

### NovaStar® plus NIV maszk

A NovaStar® plus NIV maszkok több betegnél alkalmazhatók. Hővel vagy vegyi úton fertőtleníthetők a felsorolt fertőtlenítőszerekkel (lásd a Tisztítás és fertőtlenítés című fejezetet a használati útmutatóban).

A Dräger méretező eszköz segít kiválasztani a helyes maszkméretet – nem kell felnyitni a maszk csomagolását.

- A NovaStar® plus NIV maszk intézményi/kórházi alkalmazásra szolgáló, nagyon puha, szilikongéllal töltött maszkpárnával ellátott orr-száj maszk (a szájat és az orrot is takarja).
- A maszk rugalmas és puha testébe épített hajlékony gyűrű lehetővé teszi azt, hogy a maszkot a beteg arcához hajlítsák és igazítsák egyénileg („személyre szabott illeszkedés”). Ez a személyre szabott illeszkedés minimálisra csökkenti a szivárgást, és maximalizálja a kényelmet.
- A beállítókerék lehetővé teszi a homloktámasz folyamatos állítását, hogy megtalálja a legkényelmesebb helyzetet betege számára.
- A homlokpárna stabilizálja a maszkot; puha szilikongél párna van benne, amely illeszkedik a beteg homlokának görbületéhez.
- A NovaStar® plus NIV maszk egyszerű és biztonságos rögzítéséről a mágneses kapcsok gondoskodnak. Sürgősségi helyzetben az önállító mágneses kapcsok gyorsan nyithatók és biztonságosan zárhatóak.

## Részletek



D-8726-2019  
NovaStar® plus fejpánttal



D-8735-2019  
NovaStar® plus mágneses kapocs



D-8731-2019  
NovaStar® plus homlokpárna

## Rendelési információk

<b>NovaStar® plus NIV orr-száj maszk normál könyökelemmel (SE)</b>	<b>Csomagolási egység</b>	<b>Rendelészám</b>
S méret	3	MP05051
M méret	3	MP05052
L méret	3	MP05053
XL méret	3	MP05054

<b>NovaStar® plus NIV orr-száj maszk fulladás elleni szeleppel (AAV)</b>	<b>Csomagolási egység</b>	<b>Rendelészám</b>
S méret	3	MP05061
M méret	3	MP05062
L méret	3	MP05063
XL méret	3	MP05064

	<b>Csomagolási egység</b>	<b>Rendelészám</b>
Fejszerelék NovaStar® plus NIV maszkhoz, mágneses kapcsolóval	1	MP05080

## Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került.  
<p>Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) weboldalra.</p>

### KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Njémacka

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### Gyártó

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23542 Lübeck, Németország

### HUNGARY

Dräger Medical Magyarország Kft.  
Szent László út 95  
1135 Budapest  
Tel: +36 1 288 5000  
Fax: +36 1 288 5001  
[medical.hungary@draeger.com](mailto:medical.hungary@draeger.com)

Dräger - South East Europe  
Regional Management  
South East Europe  
Perfektastrasse 67  
A-1230 Wien, Austria  
Tel: +43 1 60904809  
Fax: +43 1 6995497  
[contactSEE@draeger.com](mailto:contactSEE@draeger.com)

Locate your Regional Sales  
Representative at: [www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

