


O₂Star™ - Παρελκόμενα Θεραπείας Οξυγόνου

Μια ολοκληρωμένη σειρά παρελκόμενων O₂ που παρέχουν ποιότητα και άνεση τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές.

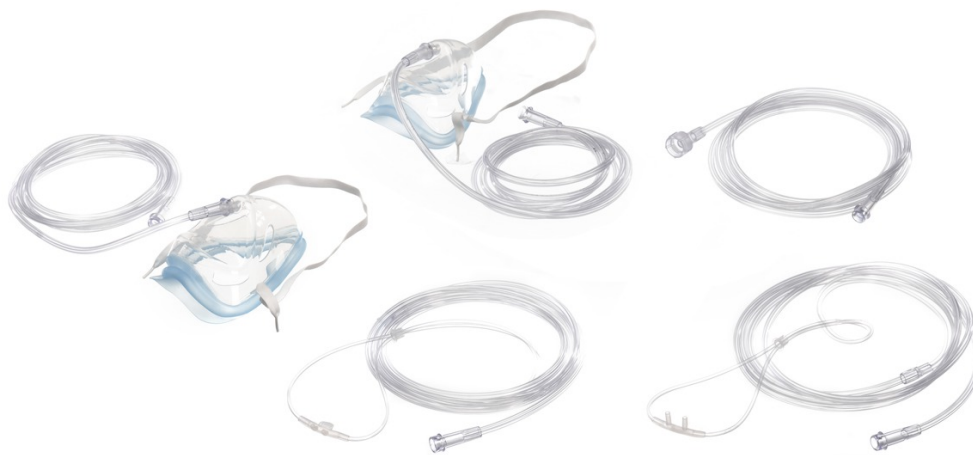

Οφέλη

Ατμοσφαιρικό οξυγόνο

Ο αέρας δωματίου περιέχει περίπου 21 % οξυγόνο. Αυτό είναι γενικά αρκετό για να διατηρήσει ένα άτομο επαρκή οξυγόνωση του αίματος μέσω της φυσιολογικής αναπνοής.

Θεραπεία της υποξίας

Για διάφορους λόγους, ωστόσο, ορισμένες ιατρικές παθήσεις προκαλούν ανεπάρκεια οξυγόνου στους ιστούς του οργανισμού (υποξία). Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό αντιμετωπίζεται με την παροχή οξυγόνου σε υψηλότερη συγκέντρωση από αυτή στον ατμοσφαιρικό αέρα. Επιπλέον, οξυγόνο χορηγείται συχνά κατά τη διάρκεια και μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Εξειδικευμένη θεραπεία

Το οξυγόνο διανέμεται στον ασθενή μέσω σωληνίσκων που συνδέονται με ρινική κάνουλα (σωληνίσκο), μάσκα προσώπου, μάσκα τύπου face tent ή μάσκα τραχειοστομίας. Η Dräger παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων παροχής οξυγόνου για διαφορετικές εφαρμογές, καθεμία από τις οποίες είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη θεραπεία ενός εύρους διαταραχών που οδηγούν σε υποξία.

Ρινικοί σωληνίσκοι

Η σειρά ρινικών σωληνίσκων O₂Star της Dräger περιλαμβάνει τέσσερα διαφορετικά σχήματα διάταξης: ευθύγραμμο, καμπυλωτό, φαρδύ και καμπυλωτό-φαρδύ. Το καθένα διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη από small (S), medium (M), large (L) έως extra-large (XL). Ο σχεδιασμός πάνω από το αυτί διατηρεί τη σωστή τοποθέτηση των μαλακών άκρων της ρινικής διάταξης, ενώ επιτρέπει πλήρη ελευθερία κινήσεων. Ο προσαρτημένος σωληνίσκος οξυγόνου είναι κατασκευασμένος με αστεροειδή σχεδιασμό αλουίου. Η ροή οξυγόνου διατηρείται ακόμη και αν ο σωλήνας έχει στραβώσει.

Μάσκες προσώπου

Το σχήμα της μάσκας προσώπου O₂Star προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και αποτελεσματική στεγανοποίηση. Ο ελαφρύς σχεδιασμός και το φαρδύτερο, ελαστικό σύστημα πρόσδεσης στο κεφάλι καθιστούν δυνατή τη σταθερή τοποθέτηση στο πρόσωπο. Το σύστημα πρόσδεσης στο κεφάλι έχει ενισχυμένα άκρα, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο να βγει από τη μάσκα. Αυτές οι μάσκες προσώπου διατίθενται σε δύο μεγέθη - small (S) και medium/large (M/L).

Επιπρόσθετα προϊόντα θεραπείας οξυγόνου

Η γκάμα προϊόντων O₂Star της Dräger περιλαμβάνει, επίσης, κιτ μασκών Venturi με έξι σταθερές βαλβίδες Venturi ή μία ρυθμιζόμενη βαλβίδα. Και τα δύο κιτ μάσκας Venturi διατίθενται σε μέγεθος S και M/L. Οι μάσκες τύπου face tent και οι μάσκες τραχειοστομίας σε δύο μεγέθη (S και M/L) συμπληρώνουν την γκάμα προϊόντων. Διατίθενται επίσης παρελκόμενα όπως εύκαμπτοι σωλήνες οξυγόνου και διάφοροι σύνδεσμοι, που παρέχουν σταθερή σύνδεση με τους εύκαμπτους σωλήνες οξυγόνου και τα αναπνευστικά κυκλώματα.

Οφέλη

Χρωματική κωδικοποίηση, ελαφρύς σχεδιασμός

Η γκάμα προϊόντων O₂Star εφαρμόζει την ίδια αρχή χρωματικής κωδικοποίησης με άλλες σειρές μασκών μίας χρήσης της Dräger —πράσινο, κίτρινο, κόκκινο. Οι ετικέτες των προϊόντων είναι χρωματικά κωδικοποιημένες: τα μικρότερα μεγέθη έχουν κόκκινη ετικέτα, τα μεσαία μεγέθη κίτρινη ετικέτα και τα μεγαλύτερα μεγέθη πράσινη ετικέτα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των μεγεθών, ακόμη και από απόσταση. Η ελαφριά, διαφανής συσκευασία φέρει σήμανση και είναι σχεδιασμένη για γρήγορο και εύκολο άνοιγμα. Όλα τα υλικά είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και η γκάμα προϊόντων είναι πλήρως απαλλαγμένη από φθαλικές ενώσεις. Οι μάσκες οξυγόνου δεν περιέχουν PVC. Κανένα από τα προϊόντα O₂Star δεν περιέχει φυσικό καουτσούκ.

Πληροφορίες παραγγελίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
O ₂ Star™ μάσκα οξυγόνου μη επανεισπνοής με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, M/L	50	MP01920
O ₂ Star™ μάσκα οξυγόνου μεσαίας συγκέντρωσης με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, M/L	50	MP01921
O ₂ Star™ κιτ μάσκας Venturi, ρυθμιζόμενη βαλβίδα venturi, μίας χρήσης, M/L	25	MP01922
O ₂ Star™ κιτ μάσκας Venturi, σταθερή βαλβίδα venturi, μίας χρήσης, M/L	25	MP01923
O ₂ Star™ μάσκα τραχειοστομίας, μίας χρήσης, M/L	50	MP01924
O ₂ Star™ μάσκα τύπου face tent, μίας χρήσης, M/L	50	MP01925
O ₂ Star™ μάσκα οξυγόνου και αερολύματος με 22 mm OD, μίας χρήσης, M/L	50	MP01926
O ₂ Star™ εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης οξυγόνου, 2,1 m, μίας χρήσης	25	MP01927
O ₂ Star™ κιτ βαλβίδας Venturi, 6 σταθερές βαλβίδες venturi, μίας χρήσης	5	MP01928
O ₂ Star™ ρυθμιζόμενη βαλβίδα venturi, μίας χρήσης	5	MP01929
O ₂ Star™ μάσκα οξυγόνου μη επανεισπνοής με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, S	50	MP01930
O ₂ Star™ μάσκα οξυγόνου μεσαίας συγκέντρωσης με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, S	50	MP01931
O ₂ Star™ μάσκα τραχειοστομίας, μίας χρήσης, S	50	MP01932
O ₂ Star™ μάσκα τύπου face tent, μίας χρήσης, S	50	MP01933
O ₂ Star™ μάσκα οξυγόνου και αερολύματος με 22 mm OD, μίας χρήσης, S	50	MP01934
O ₂ Star™ κιτ μάσκας Venturi, ρυθμιζόμενη βαλβίδα venturi, μίας χρήσης, S	25	MP01935
O ₂ Star™ κιτ μάσκας Venturi, σταθερή βαλβίδα venturi, μίας χρήσης, S	25	MP01936
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με ευθύγραμμη διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, S	50	MP01920
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με ευθύγραμμη διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, M	50	MP02921
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με ευθύγραμμη διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, L	50	MP02922

O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με ευθύγραμμη διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, XL	50	MP02923
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, S	50	MP02924
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, M	50	MP02925
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, L	50	MP02926
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, XL	50	MP02927
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, S	50	MP02928
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, M	50	MP02929
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, L	50	MP02930
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, XL	50	MP02931
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή-φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, S	50	MP02932
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή-φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, M	50	MP02933
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή-φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, L	50	MP02934
O ₂ Star™ ρινικός σωληνίσκος οξυγόνου με καμπυλωτή-φαρδιά διάταξη άκρων με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης 2,1 m, μίας χρήσης, XL	50	MP02935
O ₂ Star™ κιτ συνδέσμου: 6mm OD/22mm OD + 6mm OD/22mm ID με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης, μίας χρήσης	5	MP02940
O ₂ Star™ κιτ συνδέσμου για αναπνευστικό κύκλωμα για το Aquarog, μίας χρήσης	5	MP02941
O ₂ Star™ σύνδεσμος 22 mm ID / 22 mm ID, μίας χρήσης	5	MP02942

O ₂ Star™ εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης οξυγόνου, 4 m, μίας χρήσης	25	MP01943
O ₂ Star™ εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης οξυγόνου 2,1 m με σύνδεσμο 9/16", μίας χρήσης	25	MP01944
O ₂ Star™ εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης οξυγόνου 4 m με σύνδεσμο 9/16", μίας χρήσης	25	MP01945
O ₂ Star™ πακέτο παρουσίασης παρελκόμενων θεραπειών οξυγόνου συμπτ. μάσκας, ρινικού σωληνίσκου, εύκαμπτου σωλήνα σύνδεσης	5	MP01946

Δεν είναι όλα τα προϊόντα, συνθέσεις και υπηρεσίες διαθέσιμα σε όλες τις χώρες. Τα αναφερόμενα εμπορικά σήματα είναι καταχωρημένα σε κάποιες χώρες και δεν είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένα στην χώρα στην οποία πωλούνται. Πηγαίνετε στο www.draeger.com/trademarks να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση.

CORPORATE HEADQUARTERS
 Draegerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53–55
 23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

GREECE
 Draeger Hellas S.A
 150 El. Venizelou Str.
 142 31, Nea Ionia
 Tel +30 210 28 21 809
 Fax +30 210 28 21 214
greece.medical@draeger.com

**Draeger - South East Europe
 Regional Management**
 South East Europe
 Perfektastrasse 67
 A-1230 Wien, Austria
 Tel +43 1 60 90 4809
 Fax +43 1 69 95 497
contactSEE@draeger.com

Κατασκευαστής:
 Draegerwerk AG & Co. KGaA
 Moislinger Allee 53-55
 23542 Lübeck, Γερμανία

Αναζητήστε τον
 Περιφερειακό Εκπρόσωπο
 Πωλήσεών σας στο:
[www.draeger.com/
 epikinonia](http://www.draeger.com/epikinonia)

