



Ventilatör Ailesi Evita 2 dura / 4 / XL Aksesuar ve Sarf Malzemeleri

Flow Sensor, Spirolog:

Akış Sensörü, Parça Kodu: 8403735, 5'li kutu

Sterilize edilemez, Sekusept,powder,classic ile %4 konsantrasyonda 15dk. daldırarak dezenfeksiyon veya manuel temizleme



Flow Sensor, Spirolife :

Akış Sensörü, Parça Kodu: MK01900

Buhar sterilizasyonu ve otoklav (134° - 5 dk) veya sekusept powder classic ile %4 konsantrasyonda 15dk. daldırarak dezenfeksiyon veya manuel temizleme



Ekspirasyon Valfi Tek Kullanımlık:

Parça Kodu: 8414776, 10'lu kutu

Tek kullanımlık, her yeni hastayla değiştirilmelidir


Tek hasta kullanımı 7 gündür.



Ekspirasyon Valfi Çok Kullanımlık:

Parça Kodu: 8410580

Buhar sterilizasyonu ve otoklav (134° - 5 dk)

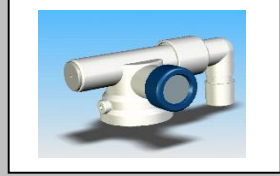

CO2 Sensörü:

Parça Kodu: 6871950



EtCO₂ sensör yerleştirme küveti:

Parça Kodu: yetişkin 6870279 , pediatrik 6870280

Steril veya otoklav edilebilir yetişkin veya pediatrik hasta grubu



EtCO₂ sensör yerleştirme küveti:

Parça Kodu: yetişkin MP01062 , pediatrik MP01063

Tek kullanımlık yetişkin veya pediatrik hasta grubu





Ventilatör Ailesi Evita 2 dura / 4 / XL Aksesuar ve Sarf Malzemeleri

Mekanik Filtre/HME Twinstar HEPA:

Yüksek bakteri ve virüs tutma kapasiteli ısı nem deęiřtirici

Parça Kodu: MP01801, 50'li paket

Y parçasında ve tek hastada 24 saat kullanım

Eęer HEPA özellikli filtre yoksa elektrostatik özellikli HMEF filtre kullanınız! (Sadece yetişkin hasta içindir)

Bakter tutma kapasitesi : 99.999%

Virüs tutma kapasitesi : 99.9999%



Mekanik Filtre Safestar 55 veya 80:

HME olmayan bakteri filtresi

Parça Kodu: MP01790- MP01785 50'li paket

Ekspiryum tarafında tek hastada 24 saat kullanım

Y parçasındaki HMEF veya HEPA özellikli bir filtreye ilave olarak, cihazın ekspiryum tarafında kullanılabilir .

(Sadece yetişkin hasta içindir)

Bakter tutma kapasitesi : 99.9999%

Virüs tutma kapasitesi : 99.9999%



Solunum Devresi:

Tek kullanımlık çift su tutuculu 25'li paket

Parça Kodu: MP00334, 25'li paket



Isıtıcı Solunum Devresi:

Tek kullanımlık 10'lu paket

Tek hat ısıtmalı devre parça kodu : MP02607

Çift hat ısıtmalı devre parça kodu : MP02606





Ventilatör Ailesi Evita 2 dura / 4 / XL Aksesuar ve Sarf Malzemeleri

NIV Maske ClassicStar :

Tek hastada kullanılabilen non invaziv ventilasyon maskesi

Boylar: S, M , L ve XL

Parça Kodu: MP04711 (S), MP04712 (M), MP04713 (L),
MP04714 (XL)

Tek hastada 30 gün kullanım



NIV Maske NovaStar:

5 hastada kullanılabilen non invaziv ventilasyon maskesi, jel yastıklı

Boylar: S, M , L ve XL

Parça Kodu: MP01579 (S), MP01580 (M) ,MP01581 (L) ,
MP04705 (XL)

Temizleme ve dezenfeksiyon kılavuzuna göre temizlenip dezenfekte edilmelidir



NIV Total Face Maske ClassicStar :

Tek hastada kullanılabilen tam yüz non invaziv ventilasyon maskesi, şişirilebilir. Diğer oronasal maskelerle dönüşümlü kullanılmalıdır.

Boylar: S, M ve L

Parça Kodu: MP02910 (S), MP02911 (M), MP02912 (L)

Tek hastada 30 gün kullanım



Çok kullanımlık Nebulizer:

Pnömatik nebulizer

Parça Kodu: 8412935

Hasta devresi üzerinde Y- parçasına en yakın noktada ve İnspiryum hattı üzerine konumlandırılır.

Sterilizasyon mümkün (134° - 5 dk)



Oksijen Sensörü:

Parça Kodu: 6850645, 1 yıl miyatlıdır.

