

Dräger Alcotest® 7000 med Alkoholin seulontalaite

Sairaanhoidon alalla saatetaan joskus tarvita alkoholitestejä. Alcotest 7000 med on täysin lääkinällisiä laitteita koskevan asetuksen (MDR) mukainen. Lisäksi Alcotest 7000 med on kehitetty diagnostiseen käyttöön ja se on hyväksytty lääketieteelliseksi laitteeksi uuden MDR-ohjeen mukaisesti. Alcotest 7000 med kuuluu luokkaan "Class Im", ja sen avulla terveydenhuoltolaitoksissa alkoholia voidaan mitata nopeasti ja luotettavasti uloshengitysilmaasta.



Edut

Vain yksi kalibrointi vuodessa

Tyypillisesti alkoholin mittauslaitteita joudutaan kalibroimaan kuuden kuukauden välein. Drägerin Alcotest® 7000 -alkometrin poikkeuksellisen hyvän mittausvakauden ansiosta laite vaatii kalibroinnin vain kerran 12 kuukaudessa. Tämä säästää aikaa ja ennen kaikkea rahaa.

Uuden MDR-ohjeen mukainen hyväksyntä

Alcotest® 7000 med on lääkinnällisiä laitteita koskevan, koko EU:ssa toukokuussa 2021 voimaan tulleen 2017/745-asetuksen (MDR) mukainen. Auditoinnissa, Dräger on valmistajana täyttänyt laitteen hyväksyntävaatimukset ISO 13485 -standardin mukaisesti. Alcotest® 7000 medin todistettua kliinistä hyötyä todentaa laadullisesti jatkuva riskinhallinta ja säännöllinen markkinavalvonta.

Eriyisen helppo käsittely todistetaan käyttötestillä

Uuden MDR-asetuksen täytyessä Alcotest 7000 med laitettiin sairaanhoidon ammattilaisten suorittamaan laajaan käytettävyydestiin (toimintatestiin). Testin tulos vahvisti laitteen olevan erityisen helppo ja turvallinen käyttää.

Laaja lämpötila-alue

Alcotest 7000 -alkometrillä voidaan suorittaa luotettavia mittauksia äärimmäisissäkin lämpötiloissa. Alkometrin patentoitu lämmitysjärjestelmä sekä sen korkealaatuiset materiaalit takaavat luotettavat mittaukset lämpötila-alueella -10 °C...+55 °C.

Korkeat rajat alkoholin havaitsemiselle uloshengitysilmosta

Laaja mittausalue on osa Alcotest 7000 -alkometrin parempaa suorituskykyä. Alkometri pystyy mittaamaan uloshengitysilmosta jopa veren 6 promillen alkoholipitoisuuden. Näyttö ilmoittaa, jos tämä mittausraja ylittyy.

Edut

Alcotest Hygiene Plus

Hygieenisyydestä huolehtiminen on yhä tärkeämpää Drägerin Alcotest-alkometreissä käytetään sekä mittaajalle että tutkittavalle erittäin hygieenistä, kehon ulkopuolista mittausteknologiaa. Käynnistyksen yhteydessä laite ja sen ulkopuolinen ilma tarkistetaan alkoholin varalta sen varmistamiseksi, etteivät esim. desinfiointiaineet vaikuttaisi mittaustulokseen. Seuraavien ominaisuuksien ansiosta:

- Testauksessa uloshengitysilma kulkeutuu laitteen ohi, ei sen läpi.
- Testattaessa mittaaja ja tutkittava ovat 90°:n kulmassa toisiinsa nähden.
- Kertakäyttöiset, yksittäispakatut suukappaleet (hyväksytyt lääketieteelliseen käyttöön)
- Kertakäyttöisten suukappaleiden hyödyt:
 - turvallinen, hygieeninen etäisyys mittaajan ja testattavan välillä
 - välikappale estää huulten ja laitteen suoran kontaktin
 - suukappale on helppo poistaa
 - takaiskuventtiili estää ilman sisäänhengityksen suukappaleen kautta

Innovaatiota perinteiden pohjalta

Dräger on yli 65 vuoden kokemuksellaan markkinajohtaja alkoholia hengitysilmaasta mittaavien laitteiden alalla. Alcotest® 7000 med on valmistettu Saksassa, ja se täyttää tiukimmatkin laatuvaatimukset.

Toimintatapa



D-24153-2020

Suukappale voidaan liittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle.



D-24151-2020

Tiedot, huomautukset ja varoitukset näkyvät 2,4 tuuman värinäytöllä.



D-24144-2020

Antaa mittaustuloksen keuhkojen rajoittuneesta toiminnasta huolimatta.



D-24152-2020

Tulostus onnistuu helposti nappia painamalla.



D-24145-2020

USB-C-liitäntä helppoa lataamista varten (hyväksyty virtapistoke)



D-24147-2020

Kumipäällysteiset alueet mahdollistavat pitävän otteen.

Lisätarvikkeet



D-265372-2020

Dräger Mobile Printer BT

Dräger Mobile Printer BT -tulostin helpottaa langatonta tulostusta kaikilta yhteensopivilta Drägerin testauslaitteilta jopa 15 metrin etäisyydeltä. Voit kiinnittää tämän pienen, kevyen, liikuteltavan tulostimen vyöhösi kiinnikkeen avulla. Laite käynnistyy ja sammuu OK-painikkeella, ja paperinsyöttöpainike takaa helppokäyttöisyyden. Valaistut symbolit antavat tietoa laitteen tilasta.

Lisätarvikkeet



D-256676-2020

Alcotest 7000 -latausteline

Alcotest 7000 -latausteline tekee alkometrin litiumioniversion lataamisesta ja PC:hen liittämisestä helppoa. Laite latautuu USB-C-johdon avulla. Latausteline voidaan tarvittaessa kiinnittää paikalleen pysyvästi.



D-28757-2009

"Alcomed" suukappaleet

Erityisvaihtoehtona lääketieteelliseen käyttöön tarjotaan "Alcomed" suukappaleet, käytettäväksi Alcotest 7000 med -alkometrin kanssa. Ne täyttävät MDR-direktiivin vaatimukset pakkausten ja merkintöjen osalta.



D-250388-2020

Suojausvaihtoehdot

Dräger tarjoaa laitteen suojaamiseksi suojalaukkuja, erilaisia kankaista valmistettuja säilytyspusseja sekä kuljetuskoteloita.

Tuotepalvelut

D-2331-2016



Huoltopalvelu

Huoltopalvelumme tarjoaa tukea erilaisin palvelupaketein – huollossamme tai suoraan asiakkaan tiloissa. Huolto, kunnossapito ja huolto ovat olennaisen tärkeitä turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi, mutta huolellinen kunnossapito ja huolto on tärkeää myös taloudelliselta kannalta. Säännölliset ennaltaehkäisevät tarkastukset, katkeamaton huolto ja alkuperäisvaraosien käyttö parantavat investointisi pitkäikäisyyttä.

D-2335-2016



Koulutus

Dräger-akatemia on jakanut vankkaa, käytännöllistä tietouttaan jo yli 40 vuotta. Järjestämme vuosittain yli 2 400 kurssia yli 600 aiheesta, ja meillä on yli 110 valtuutettua kouluttajaa. Jaamme henkilökunnallesi käytännön tietoa ja varmistamme, että he osaavat soveltaa oppimaansa tehokkaasti sekä jokapäiväisessä työssään että erityisesti kriittisissä tilanteissa. Laadimme mielellämme yrityksellesi räätälöidyn koulutusohjelman.


D-2330-2016



Vuokralaitopalvelu

Täytämme tilapäiset laitetarpeet tai toimitamme erityislaitteita sovelluksiin, joihin liittyy erityisiä vaatimuksia. Kun haluat kattaa väliaikaisesti kasvaneet laitetarpeet, Drägerin vuokrapalvelu, joka sisältää yli 65 000 laitetta, on taloudellinen vaihtoehto laitteen ostamiselle. Vuokraus on nopeaa ja helppoa. Pyynnöstä on saatavilla laaja valikoima myös muita palveluja.


D-2329-2016

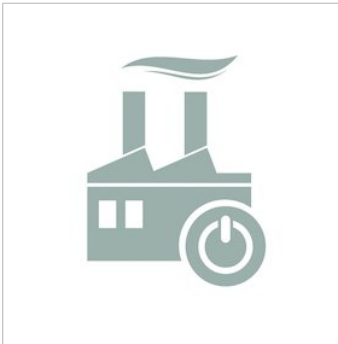

Huoltoseisokin yhteydessä tarjottava turvallisuuspalvelu

Tarvitset kattavan turvallisuusteknologisen ratkaisun, joka varustaa sinut parhaalla mahdollisella tavalla projektiasi varten. Alalla on turvallisuusnormeja, joita on noudatettava kovassa kiireessäkin. Maksimaalisen tehokkuuden ja kaikista korkeimman turvallisuustason välillä voi nousta ristiriita. Autamme sinua luomaan tasapainon: Huoltoseisokin yhteydessä tarjottava turvallisuuspalvelumme on ratkaisu, jossa otetaan huomioon kaikki huoltoseisokkia koskevat vaatimukset ja erityisesti henkilökohtaiset tarpeesi.

Tuotepalvelut

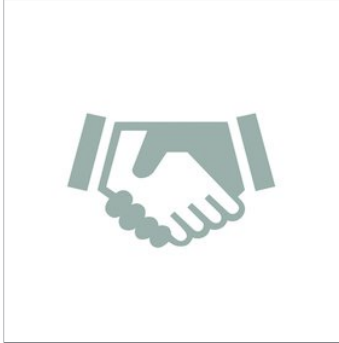

D-2332-2016

Turvallisuuspalvelu paikan päällä

Vuokraamo, henkilöstöpalvelut tai kattava turvallisuuden hallinta: Paikan päällä tarjoamamme turvallisuuspalvelut antavat tukea kaikkiin turvallisuushaasteita sisältäviin projekteihisi – ja tietenkin myös päivittäisiin toimintoihin.

Liittyvät tuotteet



D-54720-2012

Dräger DrugTest 5000

Ei pipetointia, ei pisarointia, ei ajanottoa: Dräger DrugTest 5000:lla näytteenotto on nopeaa ja helppoa. Kerätty näyte voidaan analysoida välittömästi ja tarkasti paikan päällä.

Tilaustiedot

Dräger Alcotest® 7000 med	37 00 399
Mittauslaitteen litium-versio (kiinteä sisäänrakennettu akku) ja Bluetooth, 3 suukappaletta takaiskuventtiilillä, rannehihna, USB-C-kaapeli, kalibrointitodistus.	
Dräger Alcotest 7000 -latausteline	37 00 420
Dräger Mobile BT -tulostin	37 00 421
Suukappale venttiilillä/takaiskuventtiilillä (100 kpl)	37 05 618
Virtalähde 3,2 A, 5 V	37 01 090

Huomautukset

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL

FINLAND

Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

