


Dräger DCD 5000 Afname van orale vloeistof

Eenvoudige, snelle en veilige detectie van verdovende middelen en drugs: de Dräger DCD 5000 is niet alleen in staat speekselmonsters (orale vloeistof) gemakkelijk te verzamelen, u kunt de monsters ook opslaan en voor analyse naar het laboratorium opsturen – zonder dat het monster onderweg wordt beïnvloed.

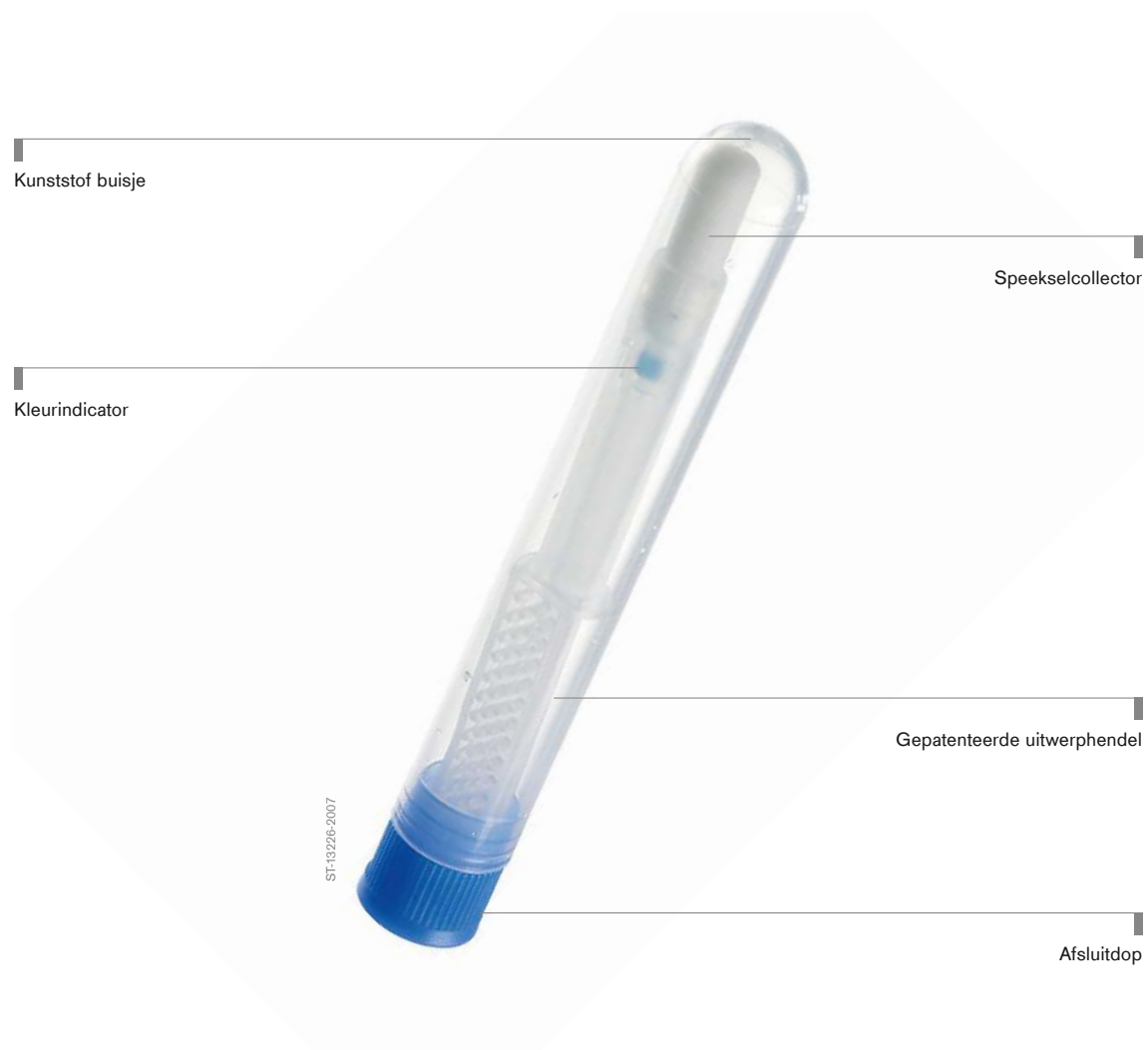

Voordelen

Ultrafiltraat van bloed

Speeksel is een bewezen ultrafiltraat in de klinisch-chemische diagnostiek: de speekselmonsters zijn goedgekeurd als monstermateriaal voor de opsporing en diagnostische analyse van verdovende middelen en drugs.

Controle zonder onderbreking

In vergelijking met een urinemonster biedt de speekselmethode een ononderbroken controle. Hierdoor wordt manipulatie door de te testen persoon uitgesloten.

Gemakkelijk, schoon en veilig

De resultaten van een pre-test worden betrouwbaar bevestigd door een laboratoriumanalyse. Opslag, vervoer en heropname van het monster mogen geen invloed hebben op dit resultaat. De Dräger DCD 5000 speekselverzamelset zorgt voor een betrouwbaar en veilig proces.

Dubbele monstername


Met de DCD 5000 kunnen twee afzonderlijke monsters onder dezelfde voorwaarden worden verzameld. Voor een gelijktijdige dubbele monstername worden twee collectors eenvoudig met beide achterzijden aan elkaar geklikt. Nadien kunnen beide collectors weer van elkaar worden gescheiden en afzonderlijk worden verwerkt, bijvoorbeeld voor transport, opslag en analyse.

Details



D-15392-2017

De speekselcollector uit het buisje halen en deze aan de te testen persoon overhandigen.

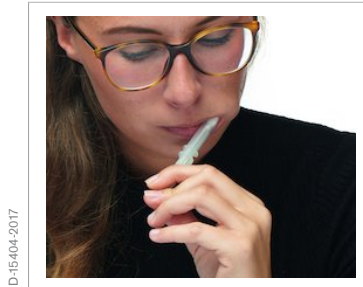

D-15404-2017

Speekselmonster verzamelen: de collector van wang tot wang bewegen.



D-15353-2017

Zodra de kleurindicator blauw verkleurt, kan de monstername worden beëindigd.



ST-19225-2007

Het monster in het buisje bewaren voor verder gebruik.



ST-19230-2007

Gepatenteerde uitwerphendel om het mondstuk automatisch te verwijderen.



ST-19228-2007

Gecombineerde dubbele collectors om twee speekselmonsters gelijktijdig te nemen

Toebehoren



D-15353-2017

Dräger SCSK

In de SCSK bevestigingsset is de Dräger DCD 5000 uitgebreid met een stabiliserende component (isopropanol) voor een zeer nauwkeurige detectie van drugs in het monster, zelfs als er langere tijd verstreken is tussen de monstername en de laboratoriumtest.

Toebehoren



D-15278-2017

Dräger SCK

Om aan de 'chain of custody' (gewaarborgde keten) procedures voor een confirmatie te voldoen, gebruikt u het verzamelsysteem Dräger SCK met speekselcollector voor laboratoriumanalyse van één monster inclusief verzendmateriaal.

Verwante producten



D-42702-2015

Dräger DrugCheck 3000

Met de Dräger DrugCheck 3000 weet u binnen enkele minuten of een persoon onder invloed van drugs is. De compacte en hygiënische, op speeksel gebaseerde, drugstest levert eenvoudig en snel betrouwbare resultaten. De drugstest werkt onafhankelijk van het stroomnet en is dus overal inzetbaar.



D-54720-2012

Dräger DrugTest 5000

Niet pipetteren, niet druppelen, niet timen: met de Dräger DrugTest 5000 laten zich niet alleen speekselmonsters snel en eenvoudig afnemen. U kunt het monster direct daarna automatisch analyseren – voor een betrouwbaar resultaat ter plaatse.

Technische gegevens

Afmetingen van de individuele collector (h x b x d)	120 mm x 15 mm x 15 mm
Werkbereik	Opslag van een ongebruikte Dräger DCD 5000: 4 tot 30 °C
Monstervolume	ca. 0,4 ml speeksel (orale vloeistof)
Toelatingen/normen	Voor niet-medische doeleinden of voor forensische toepassingen (uitsluitend in de VS)

Bestelinformatie

	Verpakkingseenheid	Bestelnr.
Dräger DCD 5000 Speekselverzamelset	20 speekselcollectors, afzonderlijk verpakt in een kunststof buisje met afsluitdop, 1 x gebruiksaanwijzing	83 19 910
SCSK – Saliva Confirmation Single Kit	Set bestaande uit: 10 afsluitbare folie zakjes, elk voorzien van 1 x DCD 5000 speekselcollector, 1 x buisje gevuld met isopropanol, 1 x gebruiksaanwijzing per set	83 26 300
SCK – Saliva Confirmation Kit	Set bestaande uit: 2 x DCD 5000 speekselcollectors, 2 x buisjes gevuld met isopropanol en verpakkingsmateriaal: 1 x afsluitbaar verzendzakje voor het analysemateriaal, 2 x veiligheidszegels, 1 x doorslagformulier voor laboratorium doeleinden en gebruiksaanwijzing	83 23 880

Opmerkingen

Niet alle producten, functies of diensten worden in alle landen verkocht.
De vermelde handelsmerken zijn alleen in bepaalde landen gedeponeerd en niet noodzakelijkerwijs in het land waarin dit materiaal wordt uitgebracht. Ga naar www.draeger.com/trademarks voor de actuele status.

HOOFDKANTOOR
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Duitsland
www.draeger.com

NEDERLAND
Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 3-5
2721 LT Zoetermeer
Postbus 310
2700 AH Zoetermeer
Tel +31 (0)79 344 46 66
receptie@draeger.com

Dräger Nederland B.V.
Marine & Offshore
Beurtschipperstraat 1
3194 DK Hoogvliet
Tel +31 (0)10 295 27 40
sales-mo.sd.nl@draeger.com

BELGIË
Dräger Safety België N.V.
Heide 10
1780 Wemmel
Tel +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

Vind uw Dräger-
contactpersoon op:
www.draeger.com/contact

