

Dräger DrugTest® 5000 Système de dépistage de drogues

Le système Dräger DrugTest® 5000 est un moyen rapide, simple et précis de détecter la présence de drogues nocives en utilisant des échantillons de salive. Notre appareil a été choisi comme le seul analyseur de détection de drogues approuvé pour usage par les forces de l'ordre du Canada qui peut dépister la cocaïne et les cannabinoïdes. L'analyseur offre une gestion facile des données grâce au logiciel de diagnostic Dräger.



Avantages

Évaluation facile

Le système DrugTest 5000 est conçu pour assurer le dépistage facile de drogues et offrir des résultats précis.

- Rapide et facile à utiliser
 - Conception conviviale
 - Les instructions qui apparaissent sur l'écran vous guident tout au long du dépistage de drogues
-

Confirmation rapide

L'appareil contrôle le temps d'analyse et la température interne afin d'obtenir des résultats précis. Les résultats positifs peuvent être confirmés en analysant en laboratoire un échantillon de sang.

Système à deux étapes

Le système est constitué des composants suivants :

- Trousse de dépistage DrugTest 5000 : une cassette d'essai prêt à l'emploi avec un collecteur d'échantillons intégré et un indicateur de l'adéquation du volume.
 - Analyseur DrugTest 5000 : un analyseur rechargeable, entièrement automatisé, offrant une analyse contrôlée et précise sur place.
-

Il peut stocker, gérer et imprimer les résultats


L'analyseur enregistre les 500 derniers résultats d'essais ainsi que la date et l'heure. En utilisant le clavier compact, vous pouvez saisir des sujets supplémentaires ou les détails de l'essai. Les données peuvent être téléchargées sur un ordinateur ou imprimées à l'aide de l'imprimante mobile.

Non invasif

Afin de protéger la personne qui effectue l'essai et le donneur, la collection d'échantillons est complètement non invasive. Lorsque la cassette est manipulée correctement, vous n'entrez pas en contact avec le liquide buccal du donneur.

Accessoires

ST-3451-2003

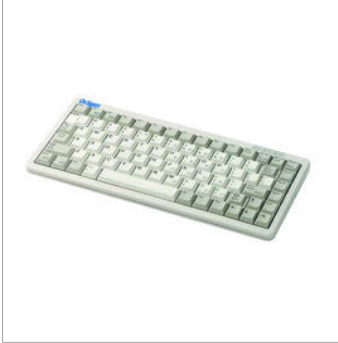

Claviers compacts

- avec interface PS2, dimensions approx. 28,2 x 13,2 x 2,4 cm
- « QWERTY » - clavier anglais, REF : 8315497
- « AZERTY » - clavier français, REF : 8315142

ST-8404-2006



Imprimante mobile Dräger

L'imprimante mobile Dräger imprime directement les résultats des essais d'alcoolémie et de toxicomanie sur place.

D-52008-2012



Mallette de transport pour Dräger DrugTest® 5000

La mallette de transport pratique permet le transport facile du système DrugTest® 5000 et est assez spacieuse pour y placer tous les matériaux nécessaires : Analyseur DrugTest® 5000, imprimante mobile, clavier, trousse d'essai et accessoires.

D-4337-2014



Mallette de transport rigide

Pour transporter en toute sécurité l'appareil Dräger DrugTest® 5000 et l'expédier, par ex. pour le calibrage périodique. On peut également y ranger le papier d'impression, les embouts buccaux, le clavier et le câble d'alimentation.

Services



Entretien Dräger

Lorsque vous faites confiance à l'équipement de dépistage d'alcool dans l'haleine et de drogues Dräger, vous pouvez être assuré que vous avez fait le bon choix. Depuis plus de 60 ans, nous sommes le chef de file mondial en dépistage d'alcool dans l'haleine. Nous utilisons une technologie de pointe pour fabriquer des appareils rapides, de confiance et facile d'emploi. De plus, nos appareils sont appuyés d'un entretien de calibre mondial—c'est l'avantage de l'entretien Dräger.

Produits associés



Dräger Alcotest® 6820

Le fait de garder les conducteurs aux facultés affaiblies hors de la route constitue un travail difficile et imprévisible. Dräger a conçu l'Alcotest® 6820 précisément pour répondre aux exigences strictes de l'analyse professionnelle de l'alcool dans l'haleine. L'appareil est rapide, facile à utiliser, très fiable et approuvé par le gouvernement canadien en tant qu'appareil de dépistage officiel pour l'application de la loi.



Dräger Alcotest® 5000

Le Dräger Alcotest® 5000 est un alcootest très fiable qui détecte la présence d'alcool. Cet alcootest ultra-rapide vous permet d'effectuer jusqu'à 12 tests par minute. Sa cheminée spéciale sans contact réduit au minimum le retour d'air expiré, évitant ainsi le risque d'infection pour les sujets suivants.

Produits associés



D-43786-2015

Dräger Alcotest® 9510

Le Dräger Alcotest® 9510 est un instrument de pointe pour des utilisations probantes en mesure de l'alcool dans l'haleine. Il a été conçu de façon à respecter les exigences et les règlements nationaux et internationaux (OIML R 126). Grâce à sa technologie à double capteur, son interface tactile couleur intuitive et son design intuitif, l'Alcotest® 9510 établit des normes supérieures.



D-6296-2009

SSK 5000 Dräger

Le SSK 5000 Dräger est utilisé pour le prélèvement de drogues sur ou à partir de surfaces. Lorsqu'il est utilisé en association avec le DrugTest® 5000 Dräger, l'échantillon est transféré vers une cassette de test afin de dépister une contamination éventuelle de cette surface par des drogues. L'échantillon prélevé peut être stocké et transporté pour des tests supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	12 V courant continu (de 11 à 15 V courant continu)
Consommation actuelle	Normalement 3 A
Dimensions (L x H x P)	200 x 260 x 250 mm (7,9 x 9,8 x 8,7 po)
Poids	4,5 kg (9,9 lb)
Température	Fonctionnement : De 5 à +40 °C (+41 à +104 °F) Stockage et transport : De -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)
Plage d'humidité	de 5 à 95 % HR, sans condensation
Interfaces	IrDA optique (imprimante), PS/2, esclave USB
Durée d'une mesure	Entre 4 à 5 minutes
Capacité de stockage	500 ensembles de données
Mallette de transport	Pour système mobile

Pour vos commandes

Article	N° de commande
L'analyseur Dräger DrugTest 5000MD comprend le câble d'alimentation, le câble de raccordement et les instructions d'utilisation.	37 01 413
Consommables	
Trousses d'essai Dräger DrugTestMD 5000 - 20/boîte (cocaïne, cannabis)	37 00 791
Trousse de dépistage sur les surfaces Dräger DrugTestMD - 2 panneaux - 20/boîte	83 20 490
Accessoires	
Clavier compact (PS/2, dimensions approx. : 282 x 132 x 24 mm (11,1 x 5,2 x 0,9 po) disposition du clavier anglophone « QWERTY »	83 15 497
Câble de voiture de 12 V (câble de raccordement à partir de la prise de voiture ou de l'allume-cigare à l'analyseur DrugTestMD 5000)	83 12 166
Imprimante mobile Dräger	83 19 310
Papier thermique pour l'imprimante Dräger Mobile (5 rouleaux)	83 19 002
Mallette de transport pour l'analyseur Dräger DrugTestMD 5000	83 22 675
Câble de raccordement USB afin de communiquer avec un ordinateur	AG02661
Trousse d'essai de formation Dräger DrugTestMD - 6 pièces	83 23 640
Un sac de transport optionnel est offert pour le transport sécuritaire de tous les composants du système. Le clavier aide à saisir les renseignements sur le sujet testé et l'opérateur du système, permettant l'impression sur place des données et des résultats.	

Notes

Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur www.draeger.com/trademarks.

CORPORATE HEADQUARTERS

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne
www.draeger.com

CANADA

Draeger Safety Canada Ltd.
2425 Skymark Avenue, Unit 1
Mississauga, Ontario, L4W 4Y6
Tél +1 905 212 6600
Toll-free +1 877 Drager 1
(+1 877 372 4371)
Fax +1 877 651 0902
Toll-free Fax +1 800 329 8823

Trouvez votre représentant
commercial régional sur :
www.draeger.com/contact

