

Sistemas de soporte Unidades de suministro de techo

Cree un puesto de trabajo ergonómico, orientado al proceso y mejore a la vez la higiene y seguridad con un sistema de soporte flexible y compacto diseñado para el uso en un amplio rango de entornos de cuidado.



Ventajas

Solución de montaje versátil

El sistema cuenta con frenos de fricción ajustables para evitar el movimiento de giro involuntario del brazo y es fácil de utilizar e instalar. Asimismo, la gestión del cables integrada evita que estos se enreden. Igualmente, su tecnología y diseño robusto garantizan una larga vida útil que ofrece ventajas en términos económicos y de funcionalidad.

- Flexible
 - Ergonómico
 - Funcional
-

Flexible

El sistema de montaje Dräger garantiza un montaje ergonómico. Puede usarse en varias combinaciones y ofrece varios productos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Este sistema, fácil de mover mediante una acción suave y precisa, cuenta con brazos de extensión y de elevación con resorte, que pueden utilizarse con diferentes interfaces estándares, tales como tubos de 38 mm o rieles verticales. Los brazos giratorios pueden usarse en configuración sencilla o doble para afrontar las necesidades específicas al instalar equipamiento individual, incluso en espacios confinados. Los brazos pesados tienen un diseño robusto que permite usar sistemas de bomba de infusión, mientras que las pantallas acopladas a los brazos de elevación pueden colocarse fácilmente en sus tres dimensiones espaciales.

Diseño ergonómico

El sistema de montaje Dräger, con una funcionalidad vanguardista, también se beneficia de la gestión integral de los cables y cuenta con varios interfaces. En lo que supone una mejora ergonómica del espacio de trabajo, se limpia con facilidad gracias a que las superficies «abiertas», en las que se pueden acumular la suciedad y las impurezas se reducen al mínimo. Fabricado en metal y con una estética atractiva, es compatible con todo el sistema Infinity y con varios adaptadores para usar equipos tanto de Dräger como de otros fabricantes.

Además cuenta con un enfoque modular, desarrollado para afrontar las necesidades de diferentes entornos clínicos, pacientes y usuarios, que ofrece ventajas ergonómicas y de funcionalidad, además de permitir un posicionamiento flexible y preciso.

Productos relacionados



MT-5877-2008

Unidad de suministro de techo Agila®

Incrementa la eficiencia y flexibilidad de cualquier quirófano, unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos con una unidad de suministro de techo modular.



D-5814-2017

Sistemas Movita®

Con una capacidad de carga especialmente alta y un amplio abanico de configuraciones entre las que elegir, la unidad de suministro de techo Movita® ofrece posibilidades de posicionamiento horizontal y vertical ilimitadas para las estaciones de trabajo quirúrgicas.



D-18484-2010

Unidad de suministro de techo Dräger Forta®

Con una gran capacidad de carga y un amplio rango de configuraciones y opciones para elegir, la unidad de suministro de techo Dräger Forta® cuenta con posibilidades de colocación casi ilimitadas para equipos pesados en el quirófano.




MT-466-2008

Cabecero suspendido Ponta®

El puente para un cuidado más eficaz. Un sistema de suministro para agilizar el flujo de trabajo, mejorar la accesibilidad del paciente y disfrutar de una flexibilidad de espacio de trabajo mejorada.


Productos relacionados

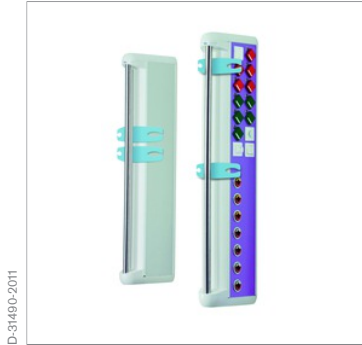

D-31490-2011

Dräger Gemina®DUO

La columna para cuidados eficientes. Una unidad de suministro de pared flexible y rentable para su sala de urgencias, sala de recuperación, cuidados intensivos o cuidados intermedios.

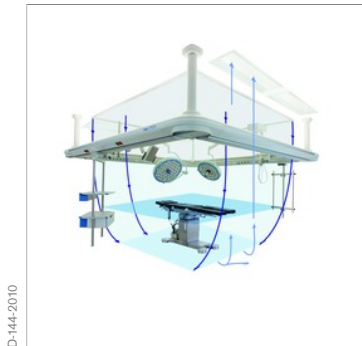

D-144-2010

Dräger Opera®

Funcional, higiénico e iluminación Opera® de Dräger combina la funcionalidad de una unidad de suministro de techo con una iluminación integral, y se ha diseñado para cubrir cualquier necesidad en un quirófano. Opera® es compatible con su sistema de techo existente y garantiza el cumplimiento de los estrictos estándares de higiene de los quirófanos.

Especificaciones técnicas

Brazo giratorio, aplicación de monitorización

Longitud	200, 300 o 400 mm, o bien en diferentes combinaciones con una longitud máxima de 600 mm (configuración de brazo doble)
Peso	De 3,5 a 5 kg (dependiendo de la configuración del brazo)
Carga máx.	15 kg

Brazo de elevación, aplicación de monitorización

Longitud	520 mm (más 200, 300 o 400 mm si se combina con el brazo de extensión correspondiente)
Peso	De 6 a 10,2 kg (dependiendo de la configuración del brazo)
Carga máx.	15 kg
Altura de elevación	máx. 500 mm

Brazo giratorio, aplicación de bomba de infusión

Longitud	200, 300 o 400 mm, o bien en diferentes combinaciones (configuración de brazo doble)
Peso	De 4 a 6,9 kg (dependiendo de la configuración del brazo)
Carga máx.	De 15 a 40 kg (dependiendo de la configuración del brazo)

Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax - 8321

CHILE

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oficinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com