


NovaStar® plus NIV Mund-Nasen-Maske Verbrauchsmaterial und Zubehör

Die wiederaufbereitbare NovaStar® plus NIV-Maske ist für die nicht-invasive Beatmungstherapie ausgelegt. Sie deckt Nase und Mund ab und unterstützt so auch bei Mundatmung eine effektive Therapie. Diese Produktpalette ermöglicht hohen Komfort und effektive Abdichtung durch spezifische Anpassung und Silikongel-Kissen.

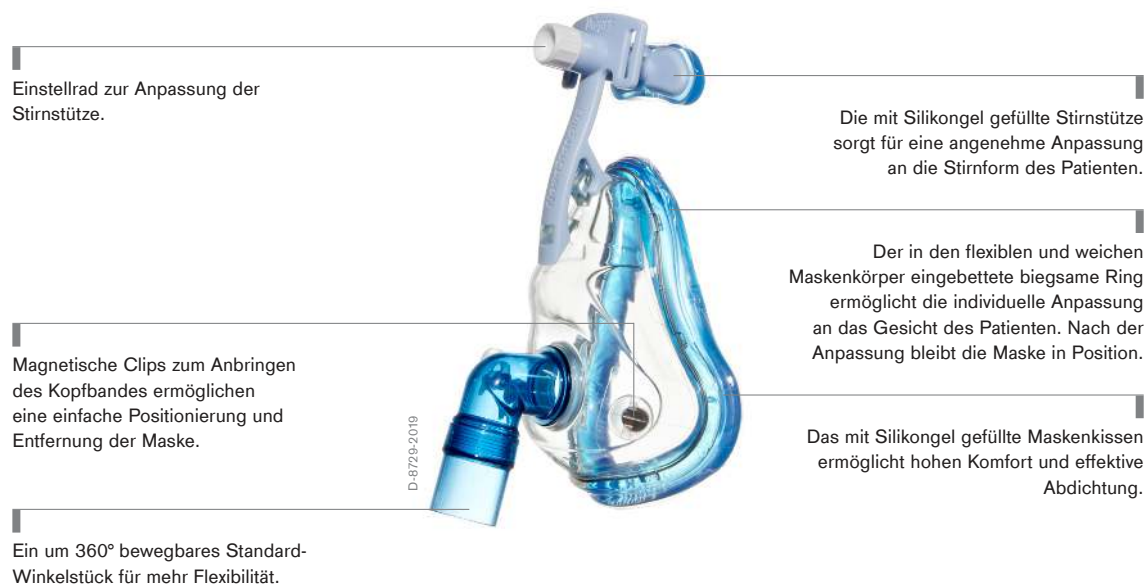

Einstellrad zur Anpassung der Stirnstütze.

Die mit Silikongel gefüllte Stirnstütze sorgt für eine angenehme Anpassung an die Stirnform des Patienten.

Der in den flexiblen und weichen Maskenkörper eingebettete biegsame Ring ermöglicht die individuelle Anpassung an das Gesicht des Patienten. Nach der Anpassung bleibt die Maske in Position.

Magnetische Clips zum Anbringen des Kopfbandes ermöglichen eine einfache Positionierung und Entfernung der Maske.

Das mit Silikongel gefüllte Maskenkissen ermöglicht hohen Komfort und effektive Abdichtung.

Ein um 360° bewegbares Standard-Winkelstück für mehr Flexibilität.



D-8729-2019

NovaStar® plus SE (mit Standard-Winkelstück)
Das blaue Winkelstück zeigt an, dass die Maske weder ein Anti-Asphyxie-Ventil noch Ausatemöffnungen hat.



D-8728-2019

NovaStar® plus AAV ohne Ausatemöffnungen
Das gelbe, transparente Winkelstück beinhaltet ein Anti-Asphyxie-Ventil (AAV), das bei reduziertem Druck (< 3 cm H₂O) den bequemen Zugang zur Raumluft ermöglicht.



D-8730-2019

NovaStar® plus AAV
Das weiße, transparente Winkelstück beinhaltet ein Anti-Asphyxie-Ventil (AAV), das bei reduziertem Druck (< 3 cm H₂O) den bequemen Zugang zur Raumluft ermöglicht. Die Ausatemöffnungen unterstützen die CO₂-Elimination während der nicht-invasiven Beatmung.

Produktvorteile


NovaStar® plus NIV-Maske

Die NovaStar® plus NIV-Maske ist auf eine Wiederverwendung ausgelegt. Sie können thermisch oder mit einem der gelisteten Desinfektionsmittel chemisch desinfiziert werden.


Die Träger-Größenschablone hilft bei der Auswahl der richtigen Maskengröße – ein unnötiges Öffnen der Maskenverpackung wird vermieden.

- Die NovaStar® plus NIV-Masken sind Mund-Nasen-Masken (Mund und Nase abdeckend) für die Anwendung in Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen mit einem sehr weichen mit Silikongel gefüllten Maskenkissen.
- Der in den flexiblen und transparenten Maskenkörper eingebettete biegsame Ring ermöglicht die individuelle Anpassung an das Gesicht des Patienten. Dieser passgenaue Sitz minimiert Leckagen und maximiert den Komfort.
- Das Einstellrad ermöglicht eine stufenlose Anpassung der Stirnstütze, um die individuell bequemste Position zu finden.
- Das Stirnpolster stabilisiert die Maske; es hat ein weiches mit Silikongel gefülltes Kissen, um eine Anpassung an die Stirnform des Patienten zu ermöglichen.
- Magnetische Clips sorgen für ein einfaches und sicheres Anlegen der NovaStar® plus NIV-Maske. Im Notfall lassen sich die selbstausrichtenden Magnetverschlüsse schnell öffnen oder sicher verschließen.

Details

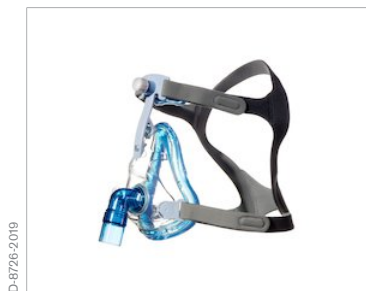

NovaStar® plus mit Kopfband

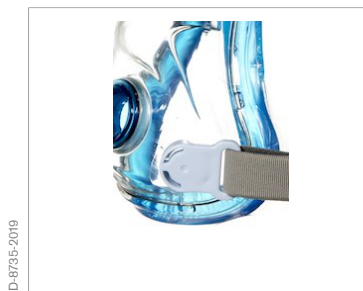

NovaStar® plus Magnetclip



NovaStar® plus Stirnstütze

Bestellinformationen

NovaStar® plus NIV Mund-Nasen-Maske mit Standard-Winkelstück (SE)	Verpackungseinheit	Bestellnummer
Größe S	3	MP05051
Größe M	3	MP05052
Größe L	3	MP05053
Größe XL	3	MP05054
NovaStar® plus NIV Mund-Nasen-Maske mit Anti-Asphyxie-Ventil (AAV)	Verpackungseinheit	Bestellnummer
Größe S	3	MP05061
Größe M	3	MP05062
Größe L	3	MP05063
Größe XL	3	MP05064
NovaStar® plus NIV Mund-Nasen-Maske mit Anti-Asphyxie-Ventil (AAV) ohne Ausatemöffnungen (EP)	Verpackungseinheit	Bestellnummer
Größe S	3	MP05071
Größe M	3	MP05072
Größe L	3	MP05073
Größe XL	3	MP05074
	Verpackungseinheit	Bestellnummer
Kopfbänderung NovaStar® plus inkl. Magnetclips	1	MP05080

Notizen

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

