


NovaStar® plus NIV orr-száj maszk Tartozékok és fogyóanyagok

A NovaStar® plus NIV maszk újrahasználható, és nem invazív lélegeztetési terápiára készült. Mivel a maszk takarja az orrot és a szájat, még szájlégzés esetén is támogatja a hatékony terápiát. Ez a termékcsála személyre szabott illeszkedésének és szilikon gélpárnájának köszönhetően nagyon kényelmes, és hatékony tömítést biztosít.

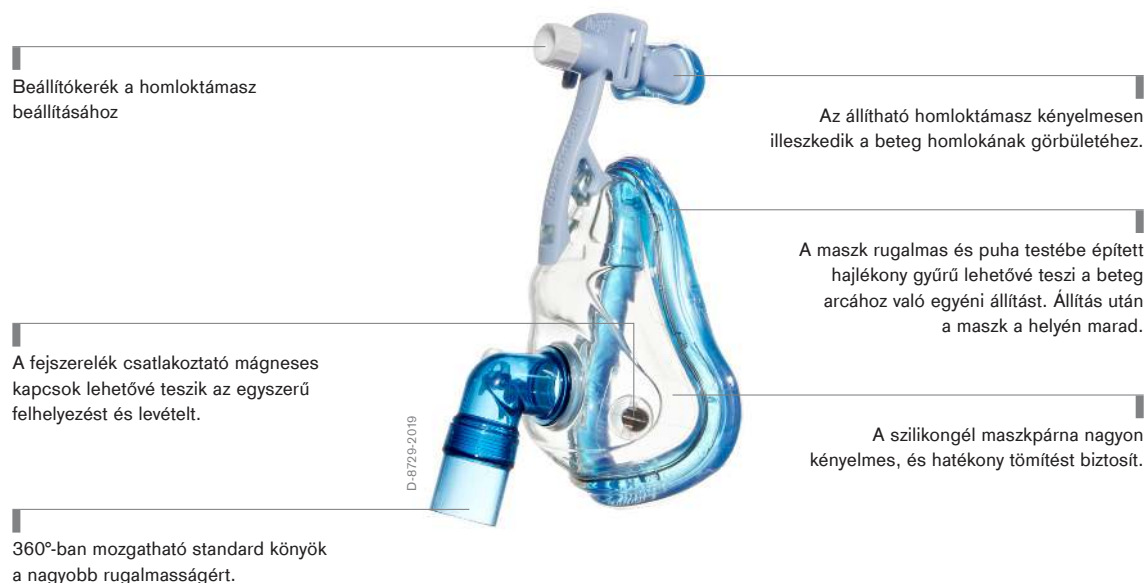

NovaStar® plus SE (normál könyökelem)

A kék könyökelem azt jelzi, hogy a maszkon sem fulladás elleni szelep, sem kilégzési port nincs.



NovaStar® plus AAV kilégzési port nélkül

A sárga, átlátszó könyökelemen fulladás elleni szelep (AAV, anti-asphyxia valve) található, amely csökkent nyomás (<3 H₂Ocm) esetén kényelmes hozzáférést biztosít a környezeti levegőhöz.



NovaStar® TS AAV

A fehér átlátszó könyökelemen fulladás elleni szelep (AAV) található, amely csökkent nyomás (<3 H₂Ocm) esetén kényelmes hozzáférést biztosít a helyiség levegőjéhez. A kilégzési portok fenntartják a CO₂-eliminációt nem invazív lélegeztetés során.

Előnyök


NovaStar® plus NIV maszk

A NovaStar® plus NIV maszkok több betegnél alkalmazhatók. Hővel vagy vegyi úton fertőtleníthetők a felsorolt fertőtlenítőszerrel (lásd a Tisztítás és fertőtlenítés című fejezetet a használati útmutatóban).


A Dräger méretező eszköz segít kiválasztani a helyes maszkméretet – nem kell felnyitni a maszk csomagolását.

- A NovaStar® plus NIV maszk intézményi/kórházi alkalmazásra szolgáló, nagyon puha, szilikongéllal töltött maszkpárnával ellátott orr-száj maszk (a száját és az orrot is takarja).
- A maszk rugalmas és puha testébe épített hajlékony gyűrű lehetővé teszi azt, hogy a maszkot a beteg arcához hajlítsák és igazítsák egyénileg („személyre szabott illeszkedés”). Ez a személyre szabott illeszkedés minimálisra csökkenti a szivárgást, és maximalizálja a kényelmet.
- A beállítókerék lehetővé teszi a homloktámasz folyamatos állítását, hogy megtalálja a legkényelmesebb helyzetet betege számára.
- A homlokpárna stabilizálja a maszkot; puha szilikongél párna van benne, amely illeszkedik a beteg homlokának görbületéhez.
- A NovaStar® plus NIV maszk egyszerű és biztonságos rögzítéséről a mágneses kapcsok gondoskodnak. Sürgősségi helyzetben az önállító mágneses kapcsok gyorsan nyithatók és biztonságosan zárhatóak.

Részletek

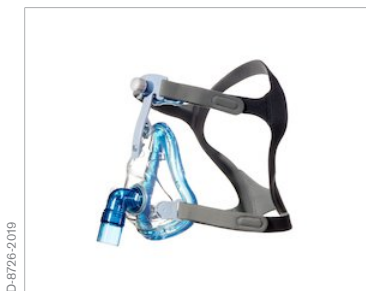

NovaStar® plus fejpánttal

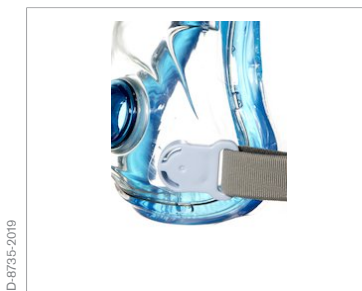

NovaStar® plus mágneses kapocs



NovaStar® plus homlokpárna

Rendelési információk

NovaStar® plus NIV orr-száj maszk normál könyökelemmel (SE)	Csomagolási egység	Rendelésszám
S méret	3	MP05051
M méret	3	MP05052
L méret	3	MP05053
XL méret	3	MP05054
NovaStar® plus NIV orr-száj maszk fulladás elleni szeleppel (AAV)	Csomagolási egység	Rendelésszám
S méret	3	MP05061
M méret	3	MP05062
L méret	3	MP05063
XL méret	3	MP05064
NovaStar® plus NIV orr-száj maszk fulladás elleni szeleppel (AAV), kilégzési port nélkül	Csomagolási egység	Rendelésszám
S méret	3	MP05071
M méret	3	MP05072
L méret	3	MP05073
XL méret	3	MP05074
	Csomagolási egység	Rendelésszám
Fejszerelék NovaStar® plus NIV maszkhoz, mágneses kapcsokkal	3	MP05080

Megjegyzések

Nem minden termék, és termékfunkció, illetve szolgáltatás kerül értékesítésre minden országban. A katalógusban említett termékelnevezések és védjegyek csak egyes országokban kerültek regisztrálásra és nem feltétlenül abban az országban ahol ez a katalógus kiadásra került. Kérem a jelenlegi állapot megtekintéséhez látogasson el a www.draeger.com/trademarks weboldalra.

KÖZPONT

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Németország
www.draeger.com

Gyártó

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23542 Lübeck, Németország

HUNGARY

Dräger Medical Magyarország Kft.
Szent László út 95
1135 Budapest
Tel: +36 1 288 5000
Fax: +36 1 288 5001
medical.hungary@draeger.com

Dräger - South East Europe
Regional Management
South East Europe
Perfektastrasse 67
A-1230 Wien, Austria
Tel: +43 1 60904809
Fax: +43 1 6995497
contactSEE@draeger.com

Locate your Regional
Sales Representative at:
www.draeger.com/contact

