


VacuSmart® Consumibles y accesorios

Un paso adelante en aspiración. En el entorno clínico actual el tiempo apremia y se necesitan soluciones rápidas, eficientes y fáciles de usar. Los cartuchos desechables VacuSmart® para aspiradores bronquiales cumplen estos requisitos. VacuSmart® es compatible con los sistemas de Dräger con recipientes de secreciones de 700 ml; no es necesario modificar el aspirador.

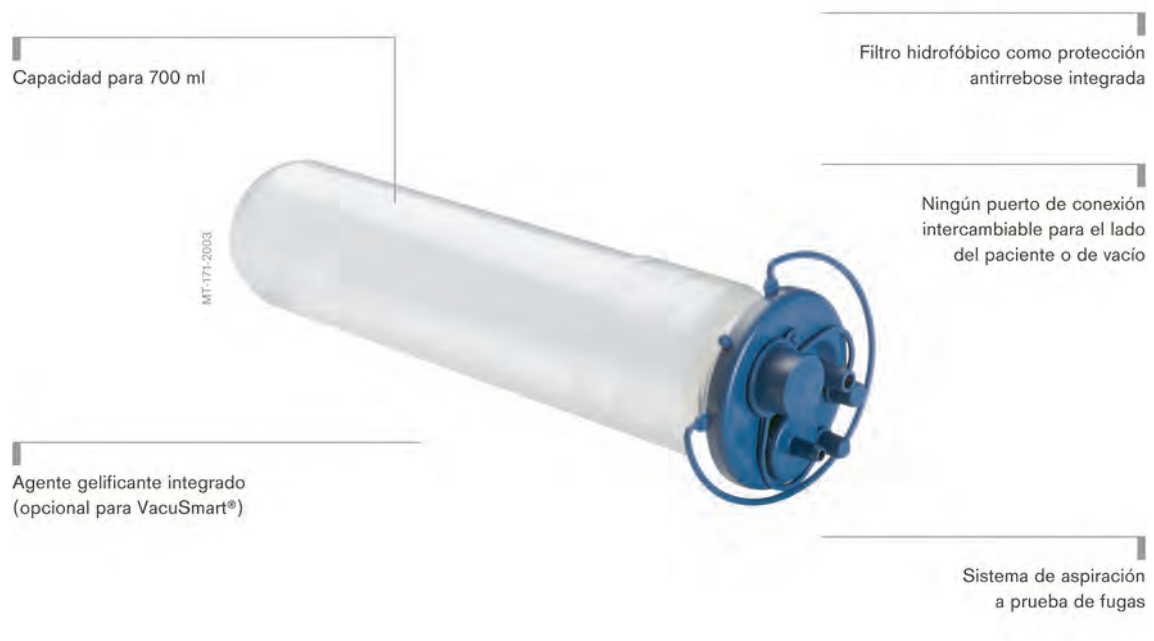

Ventajas

VacuSmart

Tres ventajas específicas que simplifican la rutina clínica diaria:

- Solución desechable higiénica
 - Facilidad de uso
 - Nueva protección antirrebose integrada
 - Agente gelificante integrado opcional
-

La solución desechable VacuSmart – la seguridad primero

El cartucho desechable VacuSmart ha sido diseñado específicamente y comprobado de manera exhaustiva para funcionar con la familia de aspiradores bronquiales Dräger. El sistema cerrado y estanco, opcionalmente provisto de un agente gelificante integrado, reduce al mínimo el riesgo de contaminaciones cruzadas. Todas estas ventajas convierten a VacuSmart en su solución para mayor seguridad, higiene y facilidad de uso; se distingue, además, por un diseño moderno y ergonómico.

Facilidad de uso de VacuSmart: el tiempo es oro

El tiempo es el factor más importante cuando se utilizan los aspiradores bronquiales. Al diseñar el VacuSmart, nuestra idea era proporcionar una solución fácil de usar: sin necesidad de modificar los aspiradores bronquiales existentes de Dräger, sin instrucciones de uso complicadas, sin pérdida de tiempo a causa de montaje o eliminación. VacuSmart Gel proporciona adicionalmente un agente gelificante integrado, que está empaquetado y protegido por una bolsa soluble en agua. El agente gelificante coagula grandes cantidades de líquido, por ello, es posible eliminarlo en la basura doméstica. Las conexiones para los tubos de aspiración y vacío son fáciles de identificar: no hay riesgo de confundir las conexiones. Un mecanismo de desacoplamiento rápido permite desconectar el VacuSmart del recipiente de secreciones en pocos segundos. El mecanismo de desacoplamiento rápido, así como los tapones de cierre fácil y seguro, también facilitan el transporte y la eliminación.

Nueva protección antirrebose integrada – sello de protección

Un nuevo filtro hidrofóbico actúa como protección antirrebose deteniendo la aspiración de secreción en cuanto se haya alcanzado la máxima capacidad. Las secreciones aerosolizadas son retenidas, al igual que las bacterias. Estas funciones protegen el aspirador y el entorno frente a la contaminación por medio de un sello hermético y estanco a los líquidos.

Además de las ventajas arriba mencionadas, también puede beneficiarse de prácticos ahorros eligiendo uno de los siguientes juegos VacuSmart:

Especificaciones técnicas

Capacidad máxima	700 ml
Agente gelificante	Poliacrilato de sodio
Protección antirrebose	Filtro hidrofóbico integrado
Duración recomendada de uso	24 h
Material	PE polietileno, EVA

Información para pedidos

Juegos VacuSmart®	No. de referencia
Solución de sistema desechable completo	MP00061
Solución de aspiración desechable que se compone de 25 unidades de VacuSmart® 700 ml MX23023 y 25 unidades de VacuSmart® Tube MX23026	
Juego VacuSmart® Gel y Tubo	MP03211
Solución de aspiración desechable que se compone de 25 unidades de VacuSmart® Gel MX23025 y 25 unidades de VacuSmart® Tube MX23026	
VacuSmart®, 700 ml	MX23023
Unidades del envase: 25 unid.	
VacuSmart® Gel, 700 ml	MX23025
Unidades del envase: 25 unid.	
VacuSmart® Tubo, 2 m	MX23026
Unidades del envase: 25 unid.	

Observaciones

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8310 / Fax - 8321

CHILE

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial
El Cortijo, Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA

Draeger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PANAMÁ

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95 95
Fax +511 626 95 73

PORTUGAL

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com